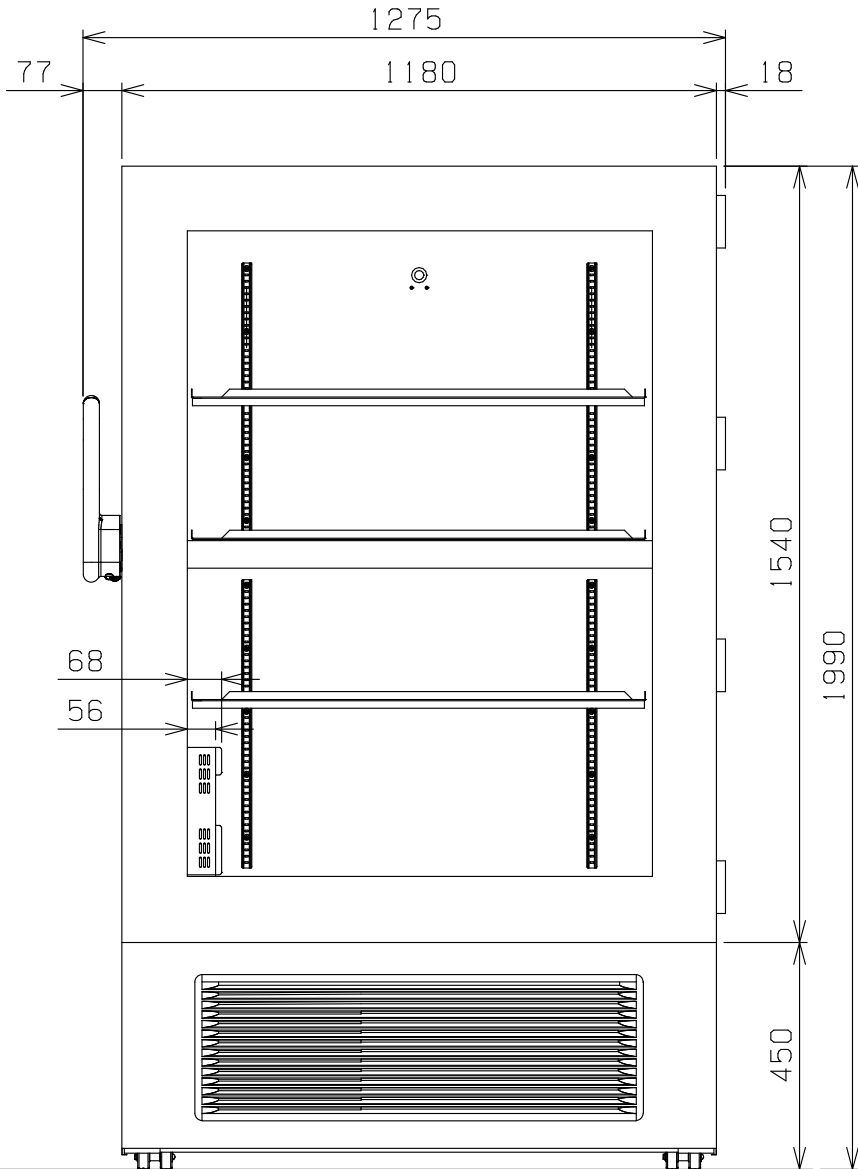
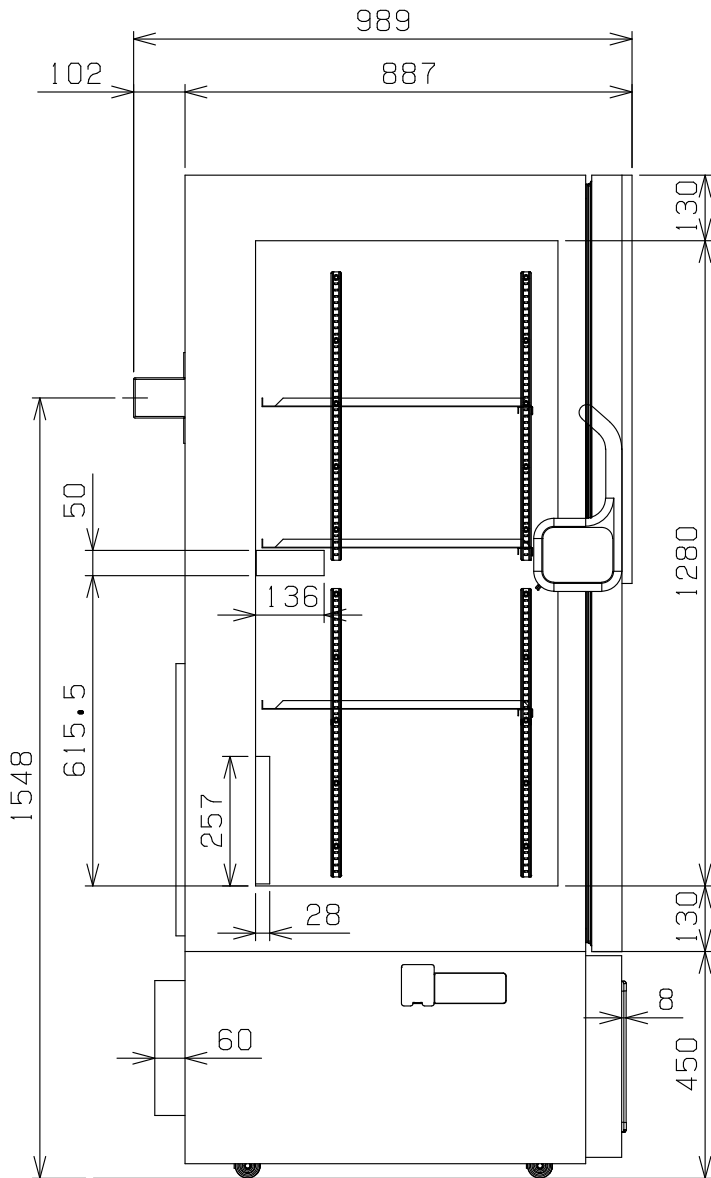
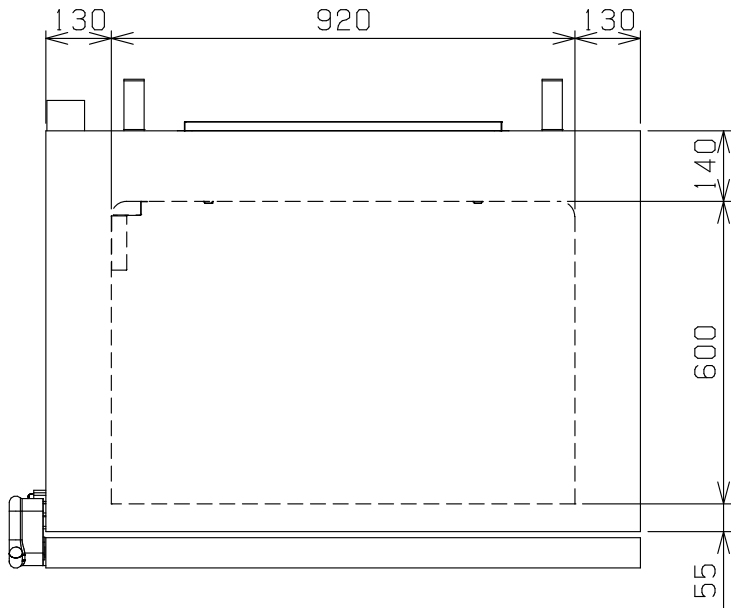
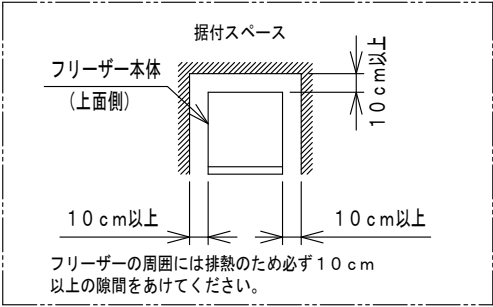




品名		超低温フリーザー	
機種名		FMD-D700ETRL	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1180 (1275) × 887 (989) × 1990	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	920×600×1280	
定格内容積 (L)		706	
製品質量 (kg)		377	
材	外装	亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル樹脂粉体塗装	
	内装	亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル樹脂粉体塗装	
質	扉	亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル樹脂粉体塗装	
	内扉	ステンレス製枠ABS樹脂パネル、2枚	
	断熱材	真空断熱材+硬質発泡ポリウレタン	
冷却性能 周囲温度30℃ (無負荷)		-90℃ (庫内中央温度)	
庫内温度制御範囲		-50~-90℃	
冷却装置	凝縮器	フィンレス銅管コンデンサー	
	冷却器	チューブオンシート式	
	冷媒	A回路 フロン系混合冷媒 B回路 フロン系混合冷媒	
	温度制御	マイコン制御 タッチパネル液晶表示	
	冷凍方式	デュアル冷却式	
電源	適用ブレーカー	三相200V 20A 50/60Hz	
	適用コンセント	丸端子	
	許容電圧範囲 (V)	180~220	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	安定時運転電流 (A)	7.6/6.2
		消費電力 (W)	1435/1465
		力 率 (%)	55/69
使用周囲環境		温度: 10~30℃ 湿度: 80%以下	
放熱量 50/60Hz		1435/1465W	
警報機能		高温警報、低温警報、停電警報、凝縮器高温保護など	
別売品		貯蔵ラック、補助冷却装置	
付属品		棚 (SUS304 3枚)、ヘラ1個	

※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
※2) 本製品の各データは弊社基準にて測定しています。
※3) 運転電流・消費電力は、下記の条件にて運転した時の値を示します。
(周囲温度: 30℃、電源電圧: 三相200V、無負荷)

<保証について>

本製品の保証は、製品に付属する保証書に基づき行います。
保証の対象範囲は製品本体のみであり、製品の故障に起因した収納物（試料や試薬など）の2次補償（再生産費用・営業補償・機会損失補償など）はいたしません。

殿		整理No.
日付: 2023. 02. 15	1 / 15	図面番号