

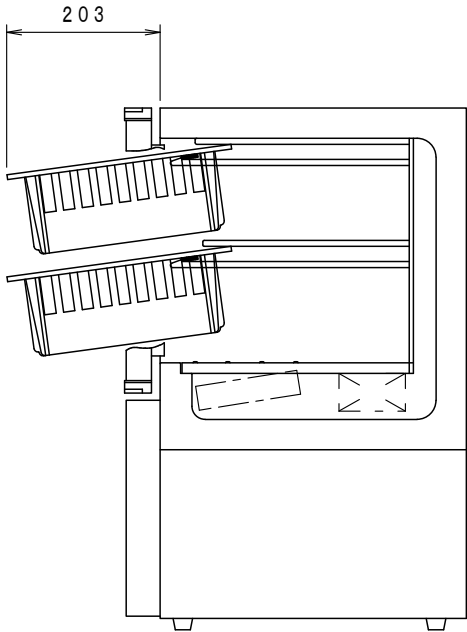
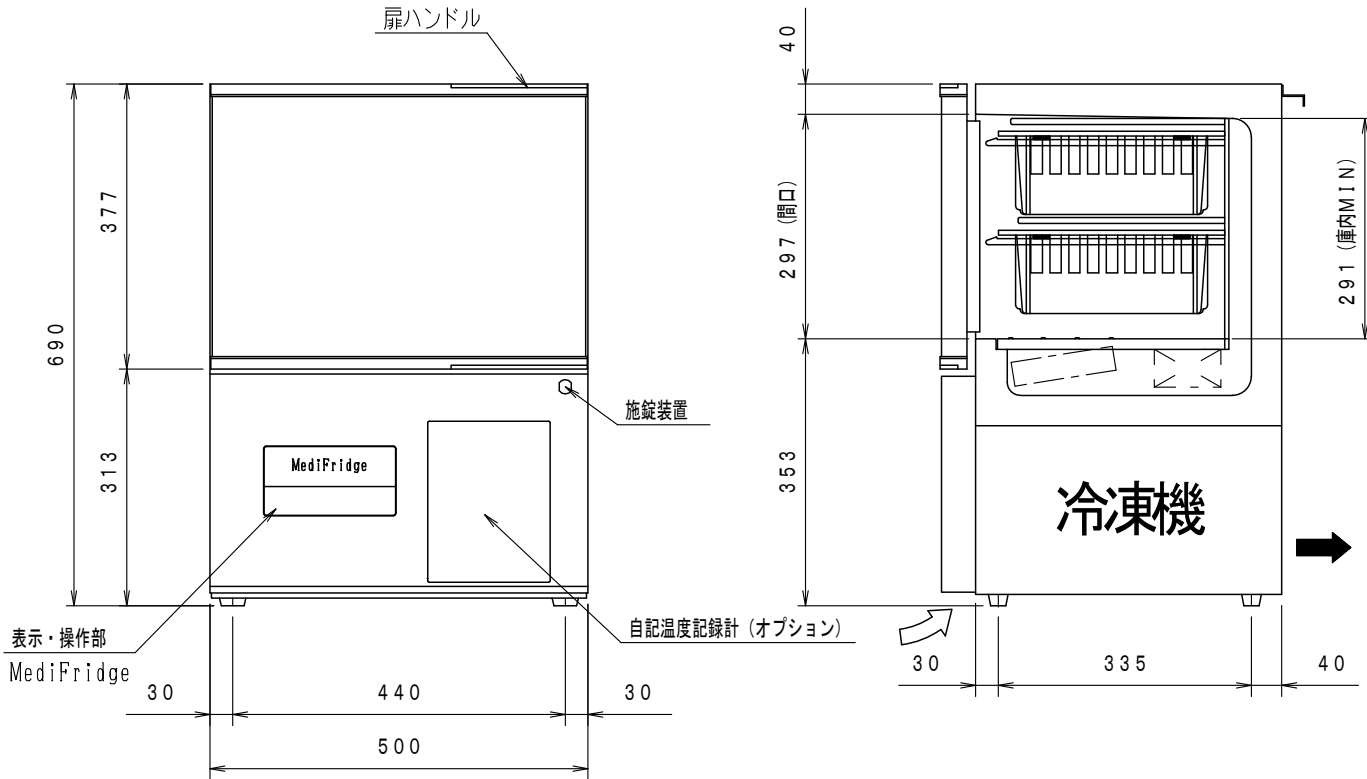
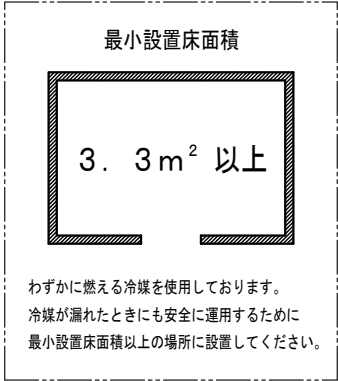


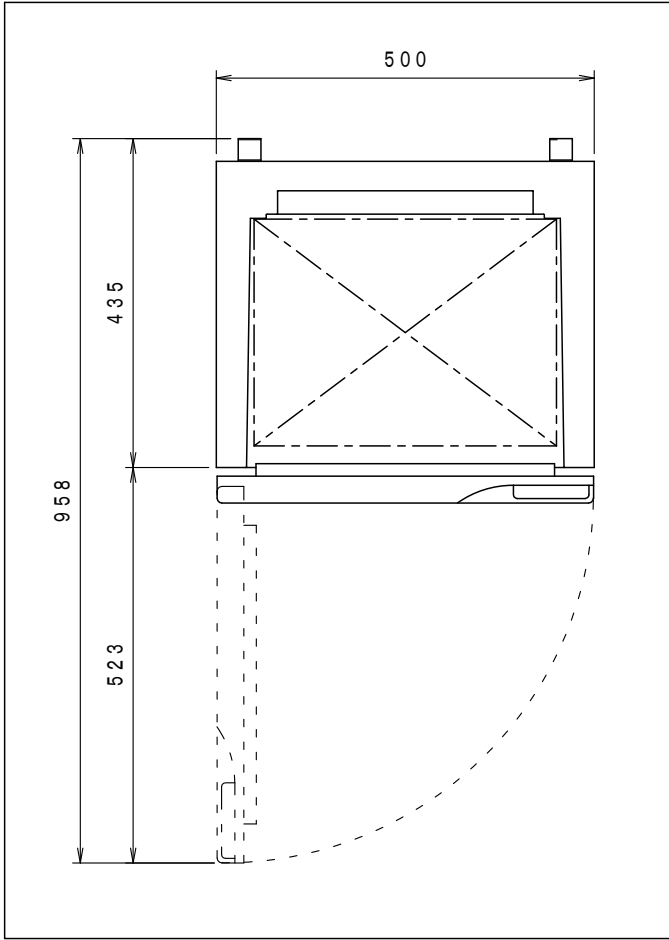

品名		小型薬用保冷库	
機種名		FMS-055GMX	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×452 (482) ×690	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	420×335×297	
有効内容積 (L)		42	
製品質量 (kg)		27	
材質	外装	塗装鋼板	
	内装	ABS樹脂 カラー鋼板	
	扉	表面：塗装鋼板 裏面：ABS樹脂 マグネット式 1枚	
	断熱材	シクロペンタン発泡	
設定温度範囲		ECモード：2～25℃ HCモード：3～5℃	
温度変動幅		ECモード：4℃ (無負荷、周囲温度-5～35℃) HCモード：2℃ (無負荷、周囲温度1～30℃)	
冷却装置	圧縮機公称出力	60W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ型	
	冷却器	強制通風式フィンチューブ型	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	自動検知式サイクルデフロスト	
電源	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.7/1.6
		始動電流 (A)	13/12
		消費電力 (W)	107/110
		力 率 (%)	63/99
	加温時 (外気低温時) (50/60Hz)	運転電流 (A)	0.5/0.5
		消費電力 (W)	45/45
使用周囲温度 (℃)		-5～35℃ 80%RH以下	
放熱量 50/60Hz		200/200W	
付属品		バスケット (2個)、鍵	
オプション		自記録温度計、識別帯シール (4色)	

※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

※2) 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。

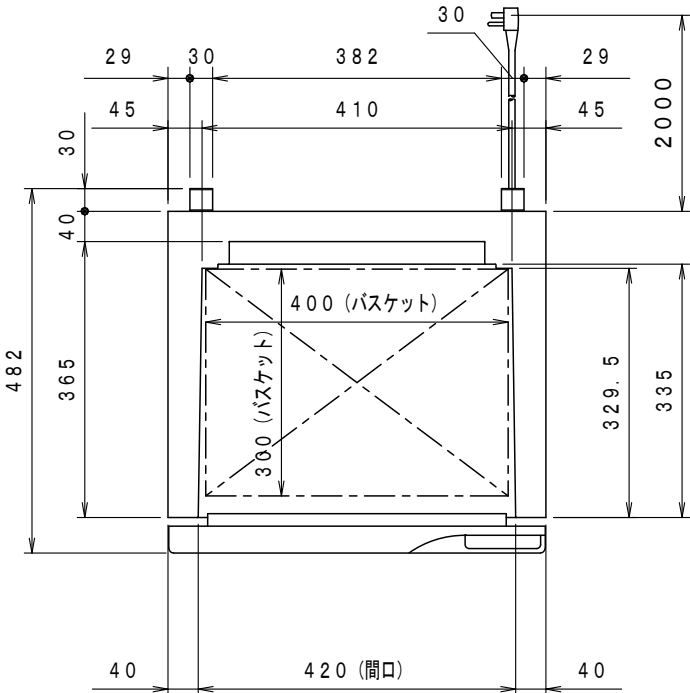