

環境にやさしいノンフロン冷媒を採用!!
横幅50センチで省スペース設置可能。

医療機器

製造販売認証番号

FMB-121G(NF) 230AGBZX00033000

FMB-181G(NF) 230AGBZX00034000

FMB-301G(NF) 230AGBZX00032000

※特定保守管理医療機器(クラスII)に該当します。

充実した警報機能

温度異常(高温・低温)

発報までの温度・時間を設定可能。

設定温度 $4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、遅延0(約20秒)~99分
 (初期設定 $4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、遅延 高温警報10分 低温警報30分)

ドア開放異常


90秒までは10秒単位で、
 それ以降は30秒単位で
 設定可能
 (初期設定 30秒)

操作パネル▶



機能的な測定孔

挿入されるケーブルや電線の形状を選びません。

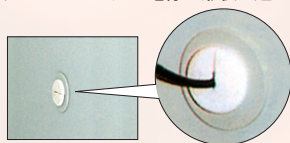

サーモレコーダー標準装備



庫内温度の履歴を自動記録
 できます。
 (記録紙1年分(12コ)付)

キャスター付

設置、移動に便利な4輪
 自在キャスター付



鍵付

施錠装置付きで
 安全管理。



収納バスケット(オプション)

血液バッグの収納が容易になります。

(収納バスケットは製品内に1段2個、FMB-121G(NF)
 は6個、181G(NF)/301G(NF)は10個収納可能。)

●FMB-121G(NF)/181G(NF)用


血液バッグ400mlを最大4個収納

外形寸法:W162.5×D266×H123mm

内形寸法:W150.5×D254×H117mm

標準価格:3,300円(税抜)

※写真は
 FMB-301G(NF)用

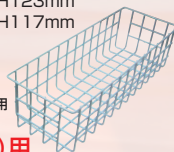

●FMB-301G(NF)用

血液バッグ400mlを最大7個収納

外形寸法:W162.5×D466×H123mm

内形寸法:W150.5×D454×H117mm

標準価格:3,700円(税抜)

※血液バッグのサイズにより収容数は異なります。




転倒防止対策

背面用転倒防止金具(標準装備)



脚用耐震固定金具(標準装備)

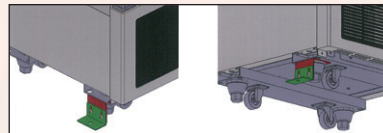

※別途取付作業費が発生します。



FMB-121G(NF)

外形寸法:W500×D450(548)×H1,430mm
 内形寸法:W420×D285×H897mm

標準価格:520,000円(税抜)

単相100V 有効内容積 121L 温度 4℃固定



FMB-181G(NF)

外形寸法:W500×D450(548)×H1,870mm
 内形寸法:W420×D285×H1,347mm

標準価格:636,000円(税抜)

単相100V 有効内容積 179L 温度 4℃固定



FMB-301G(NF)


外形寸法:W500×D650(748)×H1,870mm
 内形寸法:W420×D485×H1,347mm

標準価格:774,000円(税抜)


単相100V 有効内容積 303L 温度 4℃固定

血液用冷蔵庫

FMB-121G(NF)

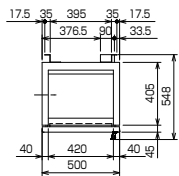


⇒ 吸込
⇒ 吹出

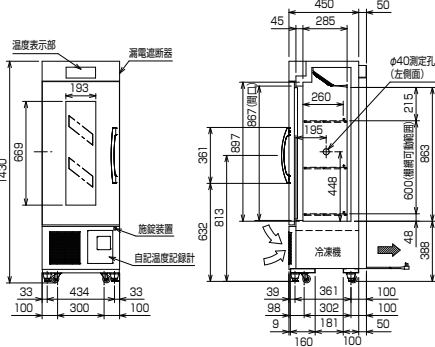


製造販売認証番号 230AGBZX00033000

FMB-181G(NF)

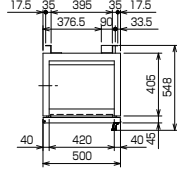


⇒ 吸込
⇒ 吹出

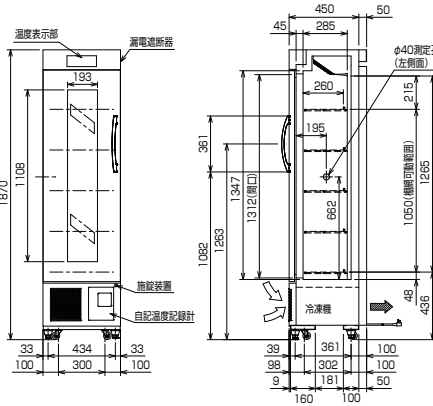


製造販売認証番号 230AGBZX00034000

FMB-301G(NF)

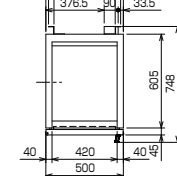


⇒ 吸込
⇒ 吹出

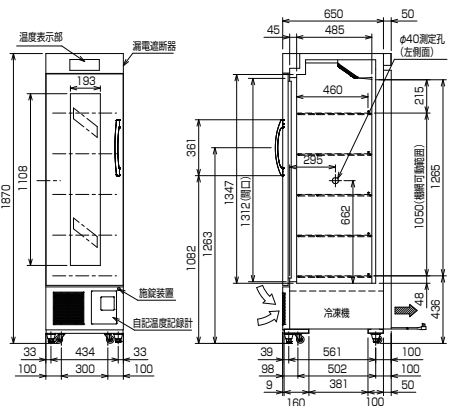

製造販売認証番号 230AGBZX00032000

機種名	FMB-121G(NF)	FMB-181G(NF)	FMB-301G(NF)
寸法			
外形(mm) (幅×奥行×高さ)	500×450(548)×1430	500×450(548)×1870	500×650(748)×1870
内形(mm) (幅×奥行×高さ)	420×285×897	420×285×1347	420×485×1347
有効内容積(ℓ)	121	179	303
製品質量(kg)	66	77	90
材質			
外装	塗装鋼板		
内装	ステンレス鋼板		
扉	表面：塗装鋼板 裏面：塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式1枚 硬質発泡ポリウレタン一体発泡		
断熱材			
冷却性能(無負荷、周囲温度30℃)	2~6℃ (4℃固定)		
圧縮機公称出力	90W		
冷媒制御方式	キャピラリーチューブ		
凝縮器	ワイヤーチューブ型		
冷却器	強制通風式フィンチューブ型		
冷媒	R1234yf		
温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
霜取り方式	自動検知式サイクルデフロスト		
電源			
適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz		
適用コンセント形式	接地2P 15A 125V		
許容電圧範囲(V)	90~110		
電気特性			
冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A) 始動電流(A) 消費電力(W) 力率(%)	2.0/1.7 16/16 120/145 72/84	2.0/1.9 16/16 125/133 73/85
加温時 (50/60Hz)	運転電流(A) 消費電力(W)	1.2/1.2 115/115	1.2/1.2 122/122
放熱量(50/60Hz)	265/280W	290/315W	300/300W
使用周囲温度	-5~35℃ 80%RH以下		
キャスター	4輪(自在)		
付属品	棚網3枚(FMB-121G(NF))・5枚(FMB-181G(NF)・FMB-301G(NF))、 鍵、転倒防止金具(床用)×2セット、 アンカーボルト(M10)×2個、ボード用アンカー×4個(ビス付き)		


棚網寸法(mm)

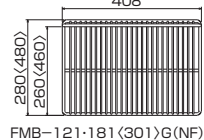

FMB-121・181(301)G(NF)

電源コンセント形状

●接地形2極15A125V

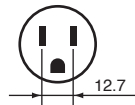

- ・コンセント形状をご確認ください。
- ・機器の設置には単独回路が必要です。延長コードのご使用、タコ足配線のご使用はお控えください。機器の故障の原因となります。

設備に関する注意事項

ノンフロン製品は、可燃性物質を冷媒に使用しております。万が一、冷媒が漏れたときも安全にお使い頂くために、最小設置床面積以上の場所に設置してください。



可燃性物質



最小設置床面積

当社では安全性を担保する考えから、一般社団法人日本冷凍空調工業会の規格^(※1)に準拠しています。

※1 一般社団法人日本冷凍空調工業会 JRA4078
「可燃性冷媒を使用した内蔵形冷蔵庫の冷媒漏えい時の安全機能要求事項」

支店・営業所は全国に70カ所以上 GALILEIのサービスネットワーク

万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

GALILEI

Be cool, Be alive.



フクシマガリレイ株式会社



安全に関するご注意

- このリーフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のからないところでご使用、保管下さい。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

このリーフレットに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

- 仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 本リーフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
- 製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

本社・FMS事業部(大阪)	(06)6477-2121	大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
FMS事業部(東京)	(03)6361-1956	東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル3F
FMS事業部(札幌)	(011)833-1211	北海道札幌市白石区中央三条1-1-15
FMS事業部(仙台)	(022)259-1671	宮城県仙台市宮城野区中野1-5-4
FMS事業部(名古屋)	(052)559-2940	愛知県名古屋市中区金山5-13-24
FMS事業部(岡山)	(086)245-0551	岡山県岡山市北区中仙道1-1-11
FMS事業部(福岡)	(092)474-5881	福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27

●カタログ・仕様図のダウンロードは

URL <https://www.galilei.co.jp>

製品についてのお問い合わせ、ご注文は —

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
認証取得 認証取得
富沢(水口)工場・岡山工場 富沢(水口)工場・岡山工場
関西技術部・FMS事業部 本社工場・FMS事業部
東京技術部・東京工場 中部技術部・西日本技術部
関西センター・長野センター

本リーフレットの記載内容は
2025年2月現在のものです。
(2502-03)G

リーフレットNo.

MDC-221