

機器のメンテナンス・アフターサービスに関するご相談・お問い合わせは
○関東サービスセンター TEL 047-419-6491 ○関西サービスセンター TEL 06-6477-2863

フロンラベルについて

このフロンラベルは、フロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒の環境影響度（地球温暖化係数：GWP）について、定められた目標への達成度を表したものです。
業務用冷凍冷蔵庫および冷凍機内蔵型冷凍・冷蔵ショーケースは、それぞれの製品区分の出荷台数で加重平均した地球温暖化係数（GWP）が目標年度（2029年）において、目標値（150）を上回らないことが製造事業者等に義務付けられています。なお、当カタログの業務用冷凍冷蔵庫および冷凍・冷蔵ショーケースは、地球温暖化係数（GWP）の目標達成表示区分を右記のフロンラベル（簡易版）にて記載しています。

ご注意 冷凍冷蔵庫は、その機器に封入する冷媒が指定されています。指定された冷媒と異なる冷媒を冷凍冷蔵庫に封入すると、機械的不具合・誤作動・故障の原因となり、場合によっては安全性確保に重大な障害をもたらす恐れがあります。封入冷媒は機器本体の銘板に記載されています。指定された冷媒以外を封入した場合の故障・誤作動などの不具合や事故などににつきましては、機器メーカーやそれら冷媒の封入作業に関与していない設置業者は一切その責任を負えません。

■対象機種種のフロンラベル

冷媒R1234yf

フロンラベル

この商品で使用しているガスの地球温暖化への影響は？

S (ノンフロン)

環境負荷の低い冷媒を使用しているため、地球温暖化への影響が非常に小さい。

目標年度 2029年 1

■当カタログの対象シリーズ

- ・業務用冷蔵庫 Xシリーズ
- ・スライド扉リーチインショーケース キュービックタイプ

■フロンラベル表示の除外製品について

- ・業務用冷凍冷蔵庫で、蒸発器における冷媒の蒸発温度の下限値が-45℃未満のもの
- ・冷凍・冷蔵ショーケースで、圧縮機定格出力が750Wを超えるもの。

製品区分	目標年度	目標値
業務用冷凍冷蔵庫	2029	150
冷凍・冷蔵ショーケース	2029	150

冷媒回収

弊社では機器廃棄の適正処理、冷媒回収に取り組んでいます。

2002年からフロン回収破壊法により、業務用冷蔵庫等の業務用冷凍空調機器を廃棄する場合は、都道府県知事の登録を受けたフロン回収業者にフロン回収を依頼し、機器使用者がその費用を負担することが義務付けられました。みだりにフロン類を放出した場合、罰則が適用されることもあります。

安全に関するご注意

- このカタログに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管下さい。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 据付、給排水、電気工事が必要です。お買い上げの販売店または資格のある専門業者にご相談ください。

このカタログに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
■製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。
●仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷の見度と若干異なる場合があります。
●本カタログに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたたく断ります。

フロン見える化

左記ラベルが貼られている製品はフロンの回収が必要です。

ISO 9001:2015 認証取得

滋賀(水口)工場 岡山工場 関西技術部・S B事業部 東京技術部 中部技術部

ISO 14001:2015 認証取得

滋賀(水口)工場 岡山工場 本社・東名古屋福岡 関西サービスセンター・販売サービスセンター

GALILEI
Be cool, Be alive.



●カタログ・仕様図のダウンロードは
URL <https://www.galilei.co.jp>

フクシマガリレイ株式会社

本社・FMS事業部(大阪) (06)6477-2121 大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

FMS事業部(東京) (03)6361-1956 東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル3F
FMS事業部(札幌) (011)833-1211 北海道札幌市白石区中央三条1-1-15
FMS事業部(仙台) (022)259-1671 宮城県仙台市宮城野区中野1-5-4
FMS事業部(名古屋) (052)559-2940 愛知県名古屋市中区金山5-13-24
FMS事業部(岡山) (086)245-0551 岡山県岡山市北区中仙道1-1-11
FMS事業部(福岡) (092)474-5881 福岡県福岡市博多区博多駅南G-2-27

ガリレイ未来医療国際拠点 GIFT 大阪府大阪市北区中之島4-3-51 中之島クロス 未来医療R&D センター1エゾンオフィス15階

本社／関西支社	Tel.06-6477-2011 (代)	〒555-0011	大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
東日本支社（東京浅草橋事務所）	Tel.03-5835-2181 (代)	〒111-0052	東京都台東区柳橋2-17-4
東日本支社（東京日本橋事務所）	Tel.03-3663-3051 (代)	〒103-0002	東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル3F
中部支社（名古屋）	Tel.052-559-2940 (代)	〒460-0022	愛知県名古屋市中区金山5-13-24
中四国支社（岡山）	Tel.086-245-0551 (代)	〒700-0964	岡山県岡山市北区中仙道1-1-11
九州支社（福岡）	Tel.092-474-5881 (代)	〒812-0016	福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27

支 店			
北海道支店〔札幌〕	011-833-1211	京都支店	075-643-9390
北東北支店〔盛岡〕	019-631-2205	南大阪支店	072-230-1808
南東北支店〔仙台〕	022-259-1671	神戸支店	078-578-9222
北関東支店〔つくば〕	029-839-3350	広島支店	082-231-1231
さいたま支店	048-654-0761	四国支店〔高松〕	087-885-3393
横浜支店	045-444-6140	東九州支店〔大分〕	097-569-9161
信越支店〔新潟〕	025-243-1080	西南九州支店〔熊本〕	096-389-2292
静岡支店	054-238-8888	沖縄支店	098-942-2788
北陸支店〔金沢〕	076-292-1560		

営業所	
北海道・東北地方	函館 旭川 帯広 登別 青森 秋田 山形 郡山
関東・甲信越地区	水戸 宇都宮 高崎 千葉 西東京 長岡 長野 松本 甲府
東海・北陸地区	沼津 浜松 豊橋 岐阜 三重 富山 福井
関西地区	滋賀 奈良 和歌山 姫路
中国・四国地区	鳥取 福山 松江 山口 徳島 高知 松山
九州地区	北九州 久留米 佐賀 宮崎 都城 長崎 佐世保 鹿児島 石垣 宮古島

海 外	
中国 香港 台湾 シンガポール マレーシア タイ ベトナム ミャンマー カンボジア	
インドネシア フィリピン	

製品についてのお問い合わせ、ご注文は



本カタログの記載内容は
2025年7月現在のものです。
(2507-25)G

カタログNo.
MD K-98

GALILEI
Be cool, Be alive.

2025～2026年版
メディカル・ライフサイエンス製品
総合カタログ

薬用保冷库／薬用冷凍冷蔵庫／メディカルフリーザー
低温インキュベーター／超低温フリーザー／血液用冷蔵庫／コールドベンチ
クリーンベンチ／純水生成装置／プレハブ冷蔵・冷凍・恒温庫
医療医薬向けクリーンルーム パネル内装システム

MediFridge 薬用保冷库・冷凍庫



LAB Line 低温インキュベーター



Vital 超低温フリーザー



冷媒ガス漏れ
10年保証

メディカル・ライフサイエンス製品対象
(詳細は P2)



Dramatic Future 2050

～誰もがワクワクする未来を拓く、ガリレイグループ～

ミライの「^{いのち}地球」と「^{くらし}温度」をまもりたい

人々の「いのち」と「くらし」を守ってきた私たちの、次の使命。
それはミライの「地球」と「温度」を守ること。
冷やす技術を培ってきた私たちは、この課題に立ち向かうため、
今までの領域を飛び出して、℃を超えた挑戦を始めます。
これから先も、ワクワクする地球であり続けるために。
ゴールに見据えるのは2050年。
まずは2030年、SDGsの実現に向け、さまざまな取り組みがスタートします。
誰もがワクワクするミライを拓く、ガリレイグループ。



薬用保冷库
FMS-505GX



薬用冷凍冷蔵庫
FMS-F155GSX




持続可能な社会をめざす、新時代の「グリーン冷媒」

冷蔵庫は庫内を冷やすために冷凍サイクルを使用しています。「冷媒」とは冷凍サイクルの中で熱を運ぶために使われている物質のことです。
長年冷媒として使用されてきた「特定フロン」や「代替フロン」ですが、地球温暖化に影響を及ぼすことがわかってきました。
そこで新たにつくり出されたのが「グリーン冷媒」です。
環境への影響度を示す数値であるGWP（地球温暖化係数）に着目すると、代替フロンのひとつ「R404A」が3920であったのに対し、
グリーン冷媒の「R1234yf」はわずか1。持続可能な社会をめざす、新時代の冷媒。それがグリーン冷媒です。※1

R1234yf とは？

『R1234yf』は微燃性・無毒でオゾン破壊係数でゼロ、GWP1の冷媒です。※2
自然冷媒である「R600a（イソブタン）」や「R290（プロパン）」も環境にやさしい冷媒です。しかし強燃性であるため、厳重な安全対策が必要です。
『R1234yf』は、上記の自然冷媒と比べてはるかに取り扱いやすく、安全性が高いことが知られています。※3
ご使用の現場で修理点検に対応できるのもR1234yfの大きな特徴です。

GWP 比較

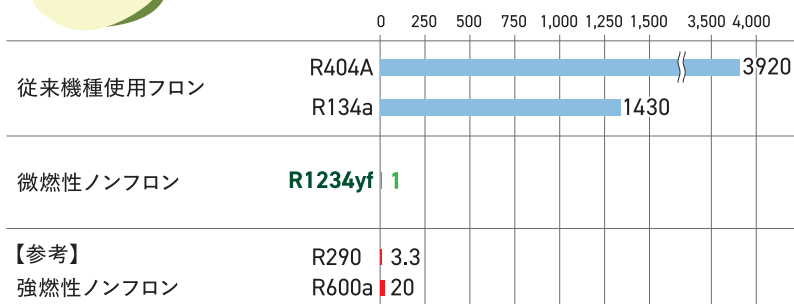

※1 R1234yfは経済産業省にて代替フロンに代わるクリーン冷媒と公表されています。「令和5年2月 経済産業省フロン対策の動向について」より引用

※2 GWP 数値は令和5年経済産業省・環境省告示第3号、平成27年経済産業省告示54号より引用

※3 一般社団法人日本冷凍空調工業会 GL-21/GL-23



グリーン冷媒「R1234yf」採用の3つのポイント ※ R1234yfはMediFridge・FMB-(NF)・FMF-5FXに採用

Point. 1 環境に配慮

従来製品で使用されていた代替フロンに比べ、地球温暖化への影響を大幅に低減します。

Point. 2 微燃性で安全

同じノンフロンの「強燃性冷媒」に比べると出火などのリスクが小さく、安全に取り扱えます。

Point. 3 管理がラク

ご使用の現場での修理・点検が可能。フロン機器に課されている点検の義務がなく、フロン排出抑制法の対象外です。



グリーン冷媒 対象機種



グリーン冷媒（ノンフロン）

対象機種は
グリーンフックピーマークが目印です！

冷媒ガス漏れ
10年保証

冷媒漏えいによる地球温暖化ゼロを目指して！

冷凍機内蔵型製品の
全機種・全製品対応開始！

業界初※ 冷媒漏えいによる修理費を
10年間全額保証いたします

※2025年6月当社調べ

私たちフクシマガリレイは、2025年4月より冷媒ガス漏えいにおける冷却不良の修理を10年間保証する《冷媒ガス漏れ10年保証》を本格的に開始しました。業務用冷蔵庫や製氷機、プラストチャーなどの厨房機器から医療理化学機器まで、冷媒ガスを使用している当社製造の冷凍機内蔵型の“全機種・全製品”※が対象です。さらに、冷凍機別置型も別途メンテナンス契約の締結で冷媒ガス漏えいによる修理費を10年間全額保証いたします。《冷媒ガス漏れ10年保証》で持続可能な社会を支えます。

※一部機種を除く。



▲詳しくはこちら



冷蔵・冷凍の試薬・薬品保管の常識を変える
薬用保冷库・冷凍庫のフラッグシップモデル

MediFridge シリーズ

なぜ、冷蔵試薬・薬品の保管は、スライド型のショーケースでなくてはならないのか？

その疑問から、従来の常識を打ち破るべく薬用保冷库MediFridgeが誕生しました。


スライド型のショーケースでは、扉を横にスライドさせるため、可動部にどうしても隙間が必要で、それが原因で、冷氣漏れ、結露など多くの困りごとがありました。

それらを解決できる製品をお客様に届けたい。－これこそサブテーマの「For Multi Solution」です－

MediFridgeシリーズには、「新しい価値をお届けしたい」私たちのそんな想いが込められています。


省エネ・省スペース・高精度制御・対結露性能向上をMediFridgeシリーズのコンセプトに、皆様にとって、ユーザーフレンドリーかつ新しい価値をお届けします。

MediFridge コンセプト

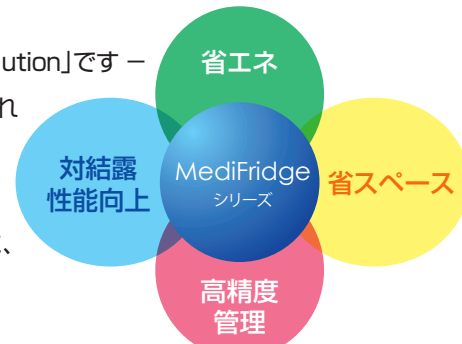

低温インキュベーター LAB Line シリーズ

ユーザー様へもっとお役に立ちたい思いから、
LABつまり研究・実験・検査される
ユーザー様から当社までLineのごとく繋がった
コミュニティをイメージしています。
ワイドレンジモデルを追加し、
より多くの用途でお使い頂けるようになりました。

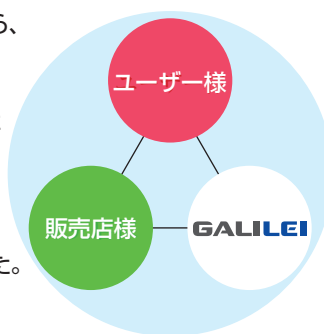

超低温フリーザー Vital シリーズ

Vitalとは「生命」や「力強い」などの意味があります。
検体やウィルス・細胞等の長期保管に使用する
超低温フリーザーに最適な名称です。
ノンフロン冷媒やデュアル冷却方式を採用した
機種もあり、お客様の様々なニーズに合わせて
ラインナップをご用意しております。

Nakanoshima Qross

未来医療国際拠点

未来医療R&Dセンター15F ガリレイ未来医療 国際拠点 GIFT開設

*GIFT ギフト：Galilei International Center for Future medicine Technology の略

未来の医療をみんなでつくる。世界のあたりまえにする。

医療機関と企業、スタートアップ、支援機関などが集積する日本初の拠点「Nakanoshima Qross」
フクシマガリレイは細胞大量製造システムに係る開発コンソーシアムに参画し、自動大量細胞凍結装置の開発を進めています。
この拠点で再生医療の開発・実用化に向けて取り組んでまいります。

製品展示だけでなく、製品の利用・協業・共同開発等を通じて、新たな価値を創造していく拠点として2024年11月18日にオープンしました。

フクシマガリレイはNakanoshima Qrossで「未来医療」に貢献します。




薬用保冷库『MediFridge』2つの特徴


1.スイング扉だから出来る使い勝手のよさと安全安心な保冷環境

結露の少ない安定した保冷環境


■ 扉の違い

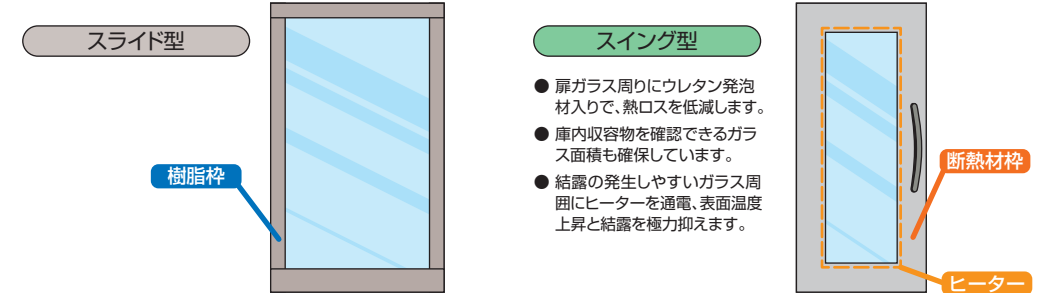


省スペース対応

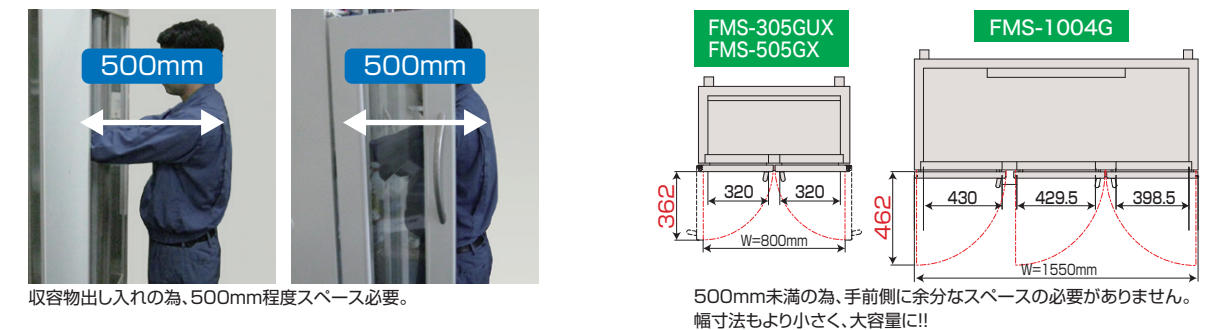

閉め忘れ防止

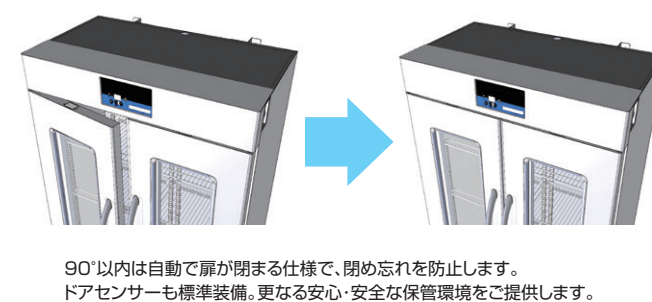

収容物の取り出し

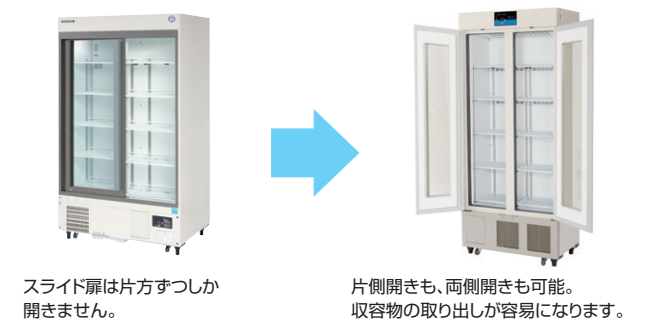

選べるカラーバリエーション



6つのカラーバリエーションからお好みに合わせて色を選択

標準色(アイボリー)に加えて、ブラウン、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、スカイブルーの6色からお選びいただけます。お好みに合わせてお選びください。

機能的に空間を演出


内観に合わせて製品の機械室パネルと天飾り部の色を選択することができ、トータルコーディネートできます。

ゾーニング

色でゾーニングを行うことで各セクションが認識しやすくなります。診療科目に合ったイメージの色を使用することで直感的な判断と理解が可能です。

試薬・薬品別・ご担当者ごとの認識保管

保管物や担当者によって製品の色を変えることで、視覚的に判断ができるので取り間違を防ぎます。

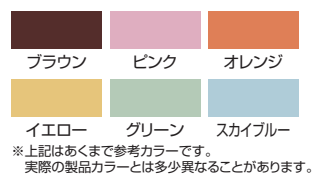

※上記はあくまで参考カラーです。実際の製品カラーとは多少異なることがあります。

2. 厳密な常温保管から、冷温保管まで1台で対応出来る薬用保冷库へ！

運転モード切替機能

EC(Eco Control)モード

温度範囲が2～25℃と広範囲の設定が可能。
要冷薬品のみならず、常温薬品の保管もできます。



EC(Eco Control)モード
1℃単位で表示


HC(High Control)モード

設定温度 3℃、4℃、5℃の選択が可能です。


- 温度分布(設定±1℃以内)
- 温度変動幅を小さくし、より安定した庫内温度を実現。

厳密な温度管理が必要な医薬品保管に最適です。


測定点

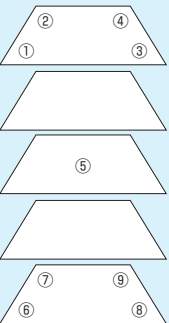

設定温度:5℃ FMS-175GSX

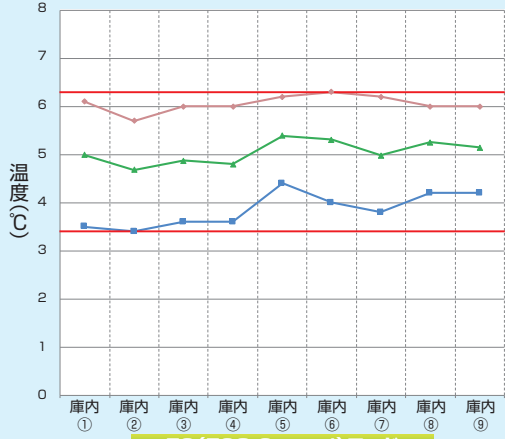


EC(Eco Control)モード

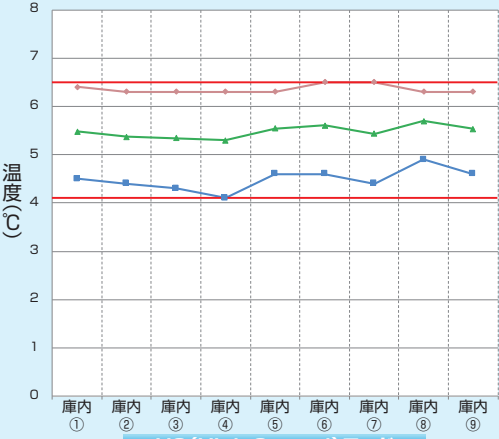


HC(High Control)モード

※測定条件 周囲温度30℃ 湿度60% 無負荷 庫内9点 空気温度測定。
※各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。
※各データは当社基準で測定しております。


測定点

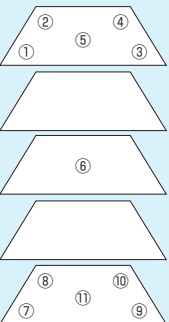

設定温度:5℃ FMS-305GUX

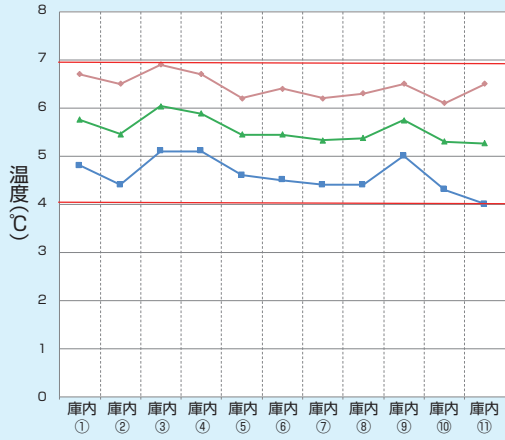

EC(Eco Control)モード

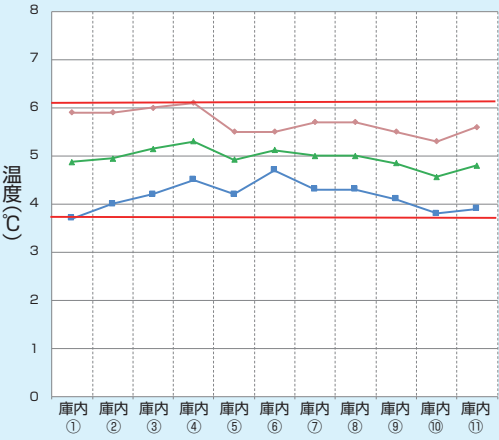

HC(High Control)モード

※測定条件 周囲温度30℃、湿度60%、無負荷 庫内11点 空気温度測定。
※各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。
※各データは当社基準で測定しております。

小型薬用保冷库

ノンフロン仕様

▶▶▶ P7に掲載



薬用保冷库

ノンフロン仕様

▶▶▶ P8に掲載



薬用冷凍冷蔵庫

ノンフロン仕様

▶▶▶ P9に掲載



低温インキュベーター

標準モデルとワイドレンジモデル合わせて9種類のラインナップ

▶▶▶ P11に掲載



超低温フリーザー

冷凍回路が2つあるデュアル冷却方式

▶▶▶ P12に掲載



薬用保冷库シリーズ	P7～9
小型薬用保冷库 MediFridge スリム型薬用保冷库 MediFridge 薬用保冷库 MediFridge 薬用冷蔵ショーケース 薬用保冷库 薬用冷凍冷蔵庫 MediFridge	
メディカルフリーザーシリーズ	P10
メディカルフリーザー パーソナル メディカルフリーザー MediFridge、メディカルフリーザー	
低温インキュベーター LABLine シリーズ	P11
低温インキュベーター 標準モデル 低温インキュベーター ワイドレンジモデル	
超低温フリーザーシリーズ	P12～13
超低温フリーザー Vital 超低温フリーザー(二元冷却式) 超低温フリーザー(シングルコンプレッサー)	
その他保冷库・関連機器シリーズ	P13～15
血液用冷蔵庫 車載コールドボックス コールドベンチ 卓上型クリーンベンチ 純水生成装置	
業務用機器・その他関連機器シリーズ	P16～17
インバーター制御 業務用冷蔵庫 スライド扉リーチインショーケース キュービックタイプ(ドリンク用) 製氷機(キューブアイス・チップアイス・フレークアイス) コールドロッカー、蓄冷剤用急速凍結専用庫、 ブラストチラー／ショックフリーザー	
大型組立シリーズ	P17～18
医療医薬向けクリーンルーム パネル内装システム PURE CIS プレハブ型冷蔵庫・冷凍庫・恒温庫(インキュベーター)	
温度測定関連	P19
保守・バリデーションサポートサービス	P20
オプション	P21～22

薬用保冷库

メディカルフリーザー

低温インキュベーター

超低温フリーザー

その他保冷库

業務用機器

大型組立

温度測定関連

保守・バリデーションサポートサービス

オプション

5

6

小型薬用保冷库 MediFridge

冷媒ガス漏れ
10年保証

製品の詳細はこちら▶



HCモード
3℃～5℃
(1℃単位)

ECモード
2℃～25℃
(1℃単位)




特徴

- 台の上、台の下にも置けるコンパクトサイズ
- 小型ながら、温度表示、警報機能、施錠装置を標準装備
- 標準装備のバスケットにより、奥のものも取り出しやすい構造
- 偏芯軸によるオートクローズ扉
- 閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備

バスケット標準装備

内形寸法
W344×D244×H99mm

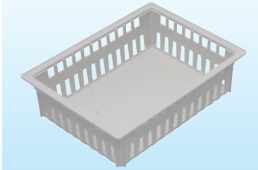

	型番	有効内容積	外形寸法※()内 突起物含む最大寸法	バスケット	質量	標準価格(税抜)
小型薬用保冷库 MediFridge	FMS-055GMX	42L	W500×D452(482)×H690mm	2個	27kg	168,000円

毒・劇薬の管理に




鍵付収納セット使用例
(オプション)

アンプルなどの収納に



小分け収納ケース使用例
(オプション)

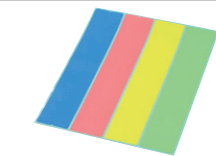

識別用テープシール 1セット(2枚)
(オプション) 標準価格:1,600円(税抜)

スリム型薬用保冷库 MediFridge

冷媒ガス漏れ
10年保証

製品の詳細はこちら▶




HCモード
3℃～5℃
(1℃単位)

ECモード
2℃～25℃
(1℃単位)



棚網寸法(mm)

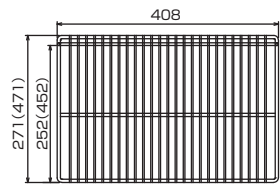

FMS-125GSX/175GSX
(305GSX)

特徴

- 横幅50センチで省スペース設置が可能
- 偏芯軸によるオートクローズ扉
- 閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備
- 転倒防止用金具標準装備
- 施錠装置標準装備

	型番	有効内容積	外形寸法※()内 突起物含む最大寸法	棚網枚数	質量	標準価格(税抜)
スリム型薬用保冷库 MediFridge	FMS-125GSX ※1	121L	W500×D450(548)×H1,430mm	3枚	64kg	257,000円
	FMS-175GSX ※1	179L	W500×D450(548)×H1,870mm	5枚	76kg	299,000円
	FMS-305GSX	303L	W500×D650(748)×H1,870mm	5枚	88kg	357,000円

ガラス窓のない仕様にもできます。

※1 転倒防止処置必須
※全機種転倒防止処置を推奨します。

冷媒ガス漏れ
10年保証
冷媒ガス漏れ10年保証対象

薬用保冷库 MediFridge

冷媒ガス漏れ
10年保証

製品の詳細はこちら▶



HCモード
3℃～5℃
(1℃単位)

ECモード
2℃～25℃
(1℃単位)



FMS-505GX
の扉開放時



FMS-1004G
の扉開放時



FMS-305GUX




FMS-505GX



FMS-1004G

特徴

- 対結露性能が格段に向上
- 偏芯軸によるオートクローズ扉
- 閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備
- 転倒防止用金具標準装備
- 施錠装置標準装備

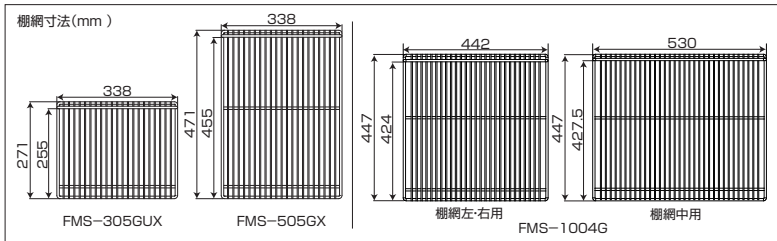

	型番	有効内容積	外形寸法※()内 突起物含む最大寸法	棚網枚数	質量	標準価格(税抜)
薬用保冷库 MediFridge	FMS-305GUX ※1	300L	W800×D450(548)×H1,870mm	10枚	100kg	369,000円
	FMS-505GX	500L	W800×D650(748)×H1,870mm	10枚	112kg	612,000円
	FMS-1004G	1,020L	W1,550×D650(748)×H1,870mm	15枚	198kg	979,000円

ガラス窓のない仕様にもできます。

薬用冷蔵ショーケース

冷媒ガス漏れ
10年保証

製品の詳細はこちら▶



2℃～14℃
(1℃単位)

LED照明付仕様
(オプション)

標準価格 30,300円(税抜)

特徴

- 庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減
- 転倒防止用金具標準装備
- 施錠装置標準装備



FMS-800GH




スライドラック仕様

(FMS-500GH-SR / FMS-800GH-SR / FMS-505GHX-SR / FMS-805GHX-SR)


- 薬品やサンプルの出し入れに便利です。

※スライドラックは右側半分のみです。

棚網寸法(mm)

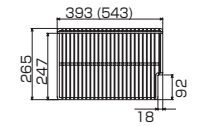

FMS-300(400)GH / FMS-305(405)GHX

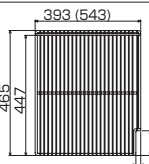

FMS-500(800)GH / FMS-505(805)GHX

	型番	有効内容積	外形寸法※()内 突起物含む最大寸法	棚網枚数	質量	標準価格(税抜)
薬用冷蔵ショーケース	FMS-300GH ※1	341L	W900×D450(500)×H1,917mm	10枚	128kg	358,000円
	FMS-400GH ※1	494L	W1,200×D450(500)×H1,917mm	10枚	138kg	484,000円
	FMS-500GH	585L	W900×D650(700)×H1,917mm	10枚	134kg	594,000円
	FMS-800GH	827L	W1,200×D650(700)×H1,917mm	10枚	156kg	809,000円
	FMS-305GHX	380L	W900×D450(500)×H1,917mm	10枚	128kg	近日発売
	FMS-405GHX	533L	W1,200×D450(500)×H1,917mm	10枚	138kg	近日発売
	FMS-505GHX	624L	W900×D650(700)×H1,917mm	10枚	134kg	近日発売
	FMS-805GHX	866L	W1,200×D650(700)×H1,917mm	10枚	156kg	近日発売
薬用冷蔵ショーケース スライドラック仕様	FMS-500GH-SR	515L	W900×D650(700)×H1,917mm	5枚	144kg	671,000円
	FMS-800GH-SR	757L	W1,200×D650(700)×H1,917mm	5枚	168kg	886,000円
	FMS-505GHX-SR	515L	W900×D650(700)×H1,917mm	5枚	144kg	近日発売
	FMS-805GHX-SR	757L	W1,200×D650(700)×H1,917mm	5枚	168kg	近日発売

※ FMS-305GHX・FMS-405GHX・FMS-505GHX・FMS-805GHX・FMS-805GHX-SRはノンフロン冷媒に変更のモデルチェンジ。

※環境によっては構造上結露が発生する場合があります。対結露性能を向上したMedifridgeシリーズをおすすめします。

冷媒ガス漏れ
10年保証

ノンフロン冷媒採用

オプション
P21・22

※1 転倒防止処置必須
※全機種転倒防止処置を推奨します。
※仕様図(一部機種を除く)はホームページからダウンロードできます。
URL <https://www.galilei.co.jp>

薬用保冷库

冷媒ガス漏れ
10年保証

製品の詳細はこちら▶


2℃~23℃
(1℃単位)

FMS-650L



FMS-1400L

※写真はサーモレコーダー(オプション)付です。

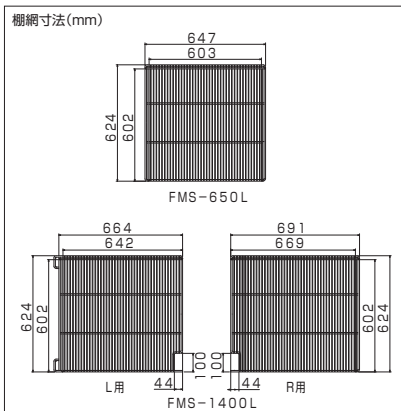

特徴

- 大容量保管タイプの薬用保冷库。側面ダクト採用で温度ムラ軽減
- サービスコンセント、測定孔標準装備にて様々な用途で使用可能
- 閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備
- 転倒防止用金具標準装備
- 施錠装置標準装備

	型番	有効内容積	外形寸法※()内突起物含む最大寸法	棚網枚数	質量	標準価格(税抜)
薬用保冷库	FMS-650L	635L	W770×D795(893)×H1,905mm	4枚	126kg	770,000円
	FMS-1400L	1,355L	W1,500×D795(893)×H1,905mm	8枚	206kg	1,001,000円

ガラス窓のない仕様にもできます。

薬用冷凍冷蔵庫 MediFridge

冷媒ガス漏れ
10年保証

製品の詳細はこちら▶

冷蔵室
2℃~14℃
(1℃単位)冷凍室
-30℃~-20℃
(1℃単位)


FMS-F155GSX



FMS-F305GX



FMS-F405GX

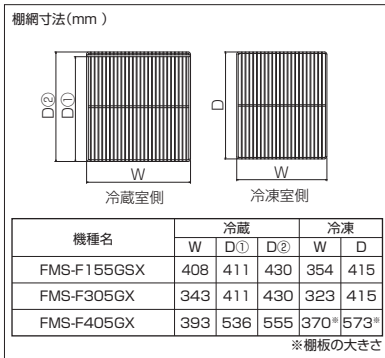FMS-F405GX
冷凍室
バスケット 4個
棚板 4枚
標準装備

特徴

- 小さい設置面積で、大容量の薬用冷凍冷蔵庫
- 冷凍室は棚網式、高さ可変で使い勝手が向上 (FMS-F155GSX・F305GX)
- FMS-F405GXは棚板式でバスケット4個標準装備
- 偏芯軸によるオートクローズ扉
- 閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備
- 転倒防止用金具標準装備
- 施錠装置標準装備

	型番	有効内容積	外形寸法※()内突起物含む最大寸法	棚網枚数	質量	標準価格(税抜)
薬用冷凍冷蔵庫 MediFridge	FMS-F155GSX	冷蔵室 173L 冷凍室 62L	W500×D600(698)×H1,870mm	冷蔵室 3枚 冷凍室 1枚	95kg	388,000円
	FMS-F305GX	冷蔵室 315L 冷凍室 113L	W800×D600(698)×H1,870mm	冷蔵室 6枚 冷凍室 2枚	132kg	486,000円
	FMS-F405GX	冷蔵室 432L 冷凍室 176L	W900×D750(848)×H1,870mm	冷蔵室 6枚 冷凍室 4枚	145kg	717,000円

ガラス窓のない仕様にもできます。

※全機種転倒防止処置を推奨します。

冷媒ガス漏れ
10年保証

冷媒ガス漏れ10年保証対象

メディカルフリーザー パーソナル

冷媒ガス漏れ
10年保証


製品の詳細はこちら▶

-40℃~-15℃
(5℃単位)

FMF-038F1-C



FMF-038F1

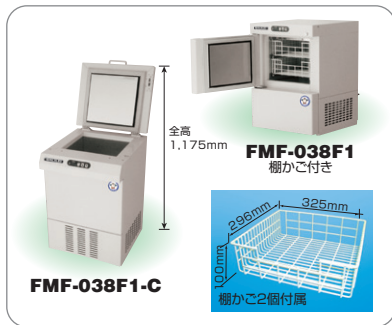

特徴

- 実験台の上にも下にも置ける「場所をとらない」パーソナルタイプ
- 40℃~-15℃(5℃単位)の幅広い範囲で温度設定可
- サーモレコーダー(オプション)取付で、少量の凍結血漿保管にも最適
- 施錠装置標準装備

	型番	有効内容積	外形寸法	カゴ	質量	標準価格(税抜)
メディカルフリーザー パーソナル	FMF-038F1-C	37L	W480×D520×H770mm	なし	45kg	242,000円
	FMF-038F1	38L	W483×D513×H717mm	2個	45kg	242,000円

メディカルフリーザー MediFridge

冷媒ガス漏れ
10年保証

製品の詳細はこちら▶

メディカルフリーザー

-30℃~-20℃
(1℃単位)2室独立
制御式

FMF-305FX



FMF-505FX

FMF-501FD /
FMF-505FDX

特徴

- 壁面冷却により安定した庫内温度を実現
- 4輪自在キャスターにより、移設も楽々
- 偏芯軸によるオートクローズ扉
- 閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備
- 耐震レッグ(オプション)にて転倒防止対応可能
- 施錠装置標準装備

バスケット標準装備(FMFシリーズ)

一つのバスケットに、マイクロプレート10枚1セットを12セット
収納可能
(バスケット14個でマイクロプレート計1,680枚収納可能)※FMF-305FXは7個付
FMF-505FXは14個付
FMF-501FD・FMF-505FDXは12個付

庫内バスケット外形寸法(内寸法)



	型番	有効内容積	外形寸法※()内突起物含む最大寸法	バスケット	質量	標準価格(税抜)
メディカルフリーザー MediFridge	FMF-305FX	300L	W500×D729(777)×H1,795mm	7個	102kg	330,000円
	FMF-505FX	548L	W820×D729(777)×H1,795mm	14個	134kg	448,000円
	FMF-501FD	516L	W820×D729(792)×H1,795mm	12個	144kg	495,000円
	FMF-505FDX	516L	W820×D729(792)×H1,795mm	12個	153kg	530,000円 近日発売

※FMF-505FDXはノンフロン冷媒に変更のモデルチェンジ

メディカルフリーザー	AMF-U349VHI	369L	W616×D770×H1,806mm	6個	138kg	近日発売
	AMF-U549VHI	504L	W793×D770×H1,806mm	12個	164kg	近日発売

冷媒ガス漏れ
10年保証ノンフロン冷媒採用
※FMF-5FシリーズはHFO冷媒(R1234yf)です。オプション
P21・22※全機種転倒防止処置を推奨します。
※仕様図(一部機種を除く)はホームページからダウンロードできます。
URL https://www.galilei.co.jp

低温インキュベーター 標準モデル LAB Line

冷媒ガス漏れ
10年保証

製品の詳細はこちら▶



-15℃~50℃
0.5℃単位
(35℃~40℃は0.1℃単位)



FMU-054I

※施錠装置・照明はオプション対応



FMU-134I



FMU-264I

オプション




FMU-054I専用専用架台
外形寸法:W600×D600×H750mm
標準価格:50,000円(税抜)

FMU-134I/100I-HC専用専用架台
外形寸法:W820×D586×H1,175mm
標準価格:70,000円(税抜)

FMU-204I/180I-HC専用専用架台
外形寸法:W820×D816×H1,175mm
標準価格:85,000円(税抜)

遮光板
FMU-134I、204I、100I-HC、180I-HC用
標準価格:8,600円(税抜)

FMU-264I、404I、230I-HC、380I-HC用
標準価格:14,000円(税抜)

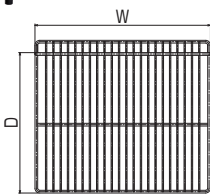

棚網寸法 (mm)

機種名	W	D
FMU-054I	385	302
FMU-134I/264I	561	313
FMU-204I/404I	558	518

特徴

- 15℃~50℃の幅広い範囲で温度設定可
- 下吹き出し、上吸い込みで、試料の乾燥を低減
- プログラム運転(8ステップ2パターン)で、多用途で使用可能
- 閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備
- 施錠装置標準装備(FMU-054Iはオプション)

	型番	有効内容積	外形寸法 ※()内 突起物含む最大寸法	棚網枚数	質量	標準価格(税抜)
低温インキュベーター	FMU-054I	50L	W483×D487(554)×H685mm	2枚	40kg	299,000円
	FMU-134I	130L	W700×D502(569)×H1,107mm	3枚	70kg	383,000円
	FMU-204I	207L	W700×D732(799)×H1,107mm	3枚	100kg	465,000円
	FMU-264I	259L	W700×D502(569)×H1,677mm	5枚	95kg	548,000円
	FMU-404I	408L	W700×D732(799)×H1,677mm	5枚	120kg	781,000円

※遮光板は、FMU-054Iは標準装備。他の機種はオプション。

ガラス窓のない仕様にもできます。

低温インキュベーター ワイドレンジモデル LAB Line

冷媒ガス漏れ
10年保証

製品の詳細はこちら▶



HC EC
-20℃~60℃
0.5℃単位
(35℃~40℃は0.1℃単位)


HC EC 切替可能




FMU-100I-HC



FMU-230I-HC

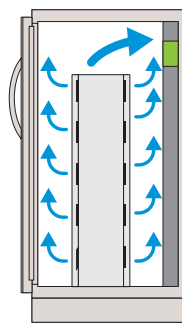


ワイドレンジモデル (側面図)

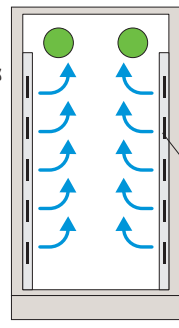

ワイドレンジモデル (正面図)

棚網寸法 (mm)

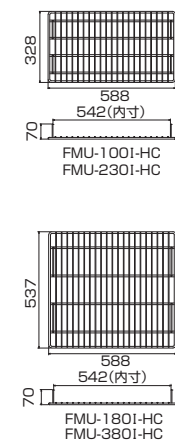

特徴

- 20℃~60℃の範囲で温度設定可
- 側面ダクトを採用し、温度ムラをより一層軽減
- プログラム運転(8ステップ2パターン)で、多用途で使用可能
- 閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備
- 施錠装置標準装備

	型番	有効内容積	外形寸法 ※()内 突起物含む最大寸法	棚網枚数	質量	標準価格(税抜)
低温インキュベーター ワイドレンジモデル	FMU-100I-HC	106L	W700×D502(598)×H1,107mm	2枚	84kg	438,000円
	FMU-180I-HC	178L	W700×D732(828)×H1,107mm	2枚	95kg	526,000円
	FMU-230I-HC	230L	W700×D502(598)×H1,677mm	5枚	115kg	633,000円
	FMU-380I-HC	383L	W700×D732(828)×H1,677mm	5枚	130kg	875,000円

※遮光板は、オプション。

ガラス窓のない仕様にもできます。

※全機種転倒防止処置を推奨します。

冷媒ガス漏れ
10年保証
冷媒ガス漏れ10年保証対象

超低温フリーザー Vital

製品の詳細はこちら▶



-80℃~-60℃

デュアル冷却方式

デュアル冷却方式

冷媒ガス漏れ
10年保証



FMD-D350ESH

単相100V

冷媒ガス漏れ
10年保証



FMD-D520ETH

三相200V

-90℃~-50℃

二元冷却方式

デュアル冷却方式

デュアル冷却方式

冷媒ガス漏れ
10年保証



FMD-W330ESH

単相100V



FMD-D600ETRL

三相200V

フィルターレス



FMD-D700ETRL

三相200V

フィルターレス

特徴

- 冷凍回路が二つあるデュアル冷却方式採用により、片側の冷凍回路が故障した際の温度上昇リスクを低減。
※FMD-W330ESH除く
- 環境負荷の少ないノンフロン冷媒*を採用
※FMD-D600ETRL・FMD-D700ETRL除く
- 高温異常・低温異常等の各警報および外部警報機能を標準装備(全機種)
- 真空断熱材採用(全機種)
- 電磁ロック搭載(FMD-D600ETRL・FMD-D700ETRL)
- フィルターレス(FMD-D600ETRL・FMD-D700ETRL)
- 施錠装置標準装備

	型番	有効内容積	外形寸法 ※()内 突起物含む最大寸法	棚板数	質量	プラグ形状	標準価格(税抜)
超低温フリーザー	FMD-D350ESH	350L	W670(741)×D875(980)×H1,850mm	3枚	250kg	㊦ 単相100V	1,815,000円
	FMD-D520ETH	519L	W770(841)×D875(980)×H1,990mm	3枚	290kg	㊦ 三相200V	2,255,000円
	FMD-W330ESH	330L	W750(845)×D867(969)×H1,850mm	3枚	258kg	㊦ 単相100V	1,298,000円
	FMD-D600ETRL	603L	W1,030(1,125)×D887(989)×H1,990mm	3枚	359kg	※ 三相200V	2,563,000円
	FMD-D700ETRL	706L	W1,180(1,275)×D887(989)×H1,990mm	3枚	377kg	※ 三相200V	2,838,000円

※丸端子出し

超低温フリーザー(二元冷却方式)

冷媒ガス漏れ
10年保証

製品の詳細はこちら▶



-85℃~-20℃

特徴

- 安定した超低温環境を実現
- 冷凍サイクル監視機能を標準装備
- 施錠装置標準装備



FMD-300D1



FMD-500E1



補助冷却装置(オプション)

停電または冷凍機の故障など万が一の際に液化炭酸ガスをフリーザー庫内に噴射させ庫内の温度上昇を防ぎます。
※別途炭酸ガスボンベが必要です。

	型番	有効内容積	外形寸法	棚枚数	質量	プラグ形状	標準価格(税抜)
超低温フリーザー アップライト型	FMD-500E1	519L	W841×D980×H1,990mm	3枚	285kg	※ 三相200V	1,870,000円
	FMD-700E1	717L	W1,081×D980×H1,990mm	3枚	320kg	※ 三相200V	2,530,000円
超低温フリーザー チェスト型	FMD-200D1	200L	W1,080×D903×H1,100mm		210kg	㊦ 単相100V	1,375,000円
	FMD-300D1	360L	W1,740×D903×H980mm		255kg	㊦ 単相100V	1,485,000円
	FMD-500D1	516L	W1,930×D903×H1,120mm		275kg	※ 三相200V	1,925,000円
	FMD-700D1	752L	W2,520×D903×H1,120mm		320kg	※ 三相200V	2,420,000円

※丸端子出し
写真は温度記録計(オプション)付です。

冷媒ガス漏れ
10年保証

ノンフロン冷媒採用
※FMD-D350ESHとFMD-D520ETHはHC系混合冷媒、FMD-W330ESHはHC冷媒です。

オプション
P21・22

※全機種転倒防止処置を推奨します。
※仕様図(一部機種を除く)はホームページからダウンロードできます。
URL <https://www.galilei.co.jp>

超低温フリーザー(シングルコンプレッサー)・ノンフロンタイプ

-80℃ **-60℃**

特 徴

- シングルコンプレッサーのため、優れたコストパフォーマンス
- 単相100Vで使用可能
- データロガー取付(オプション)で温度記録可能
- LAB8sは-85℃改造も可能(オプション)
- 施錠装置標準装備



LAB8s



PRO21

	型 番	有効内容積	外形寸法	質 量	標準価格(税抜)
超低温フリーザー (-80℃)	LAB8s	90L	W600×D730×H865mm	48kg	550,000円
	LAB11	130L	W725×D730×H865mm	53kg	670,000円
	LAB21	230L	W1,055×D730×H865mm	66kg	770,000円
	LAB31	300L	W1,305×D730×H865mm	78kg	900,000円
	LAB41	365L	W1,505×D730×H865mm	83kg	1,030,000円
超低温フリーザー (-60℃)	PRO11	130L	W725×D730×H865mm	53kg	430,000円
	PRO21	230L	W1,055×D730×H865mm	66kg	490,000円
	PRO31	300L	W1,305×D730×H865mm	78kg	560,000円
	PRO41	365L	W1,505×D730×H865mm	83kg	640,000円
	PRO60	480L	W1,705×D730×H865mm	95kg	790,000円

血液用冷蔵庫



製品の詳細はこちら▶

**4℃ 固定****医療機器**


製造販売認証番号
FMB-121G(NF) 230AGBZX00033000
FMB-181G(NF) 230AGBZX00034000
FMB-301G(NF) 230AGBZX00032000

※特定保守管理医療機器(クラスII)に該当します。


背面用転倒防止金具(標準装備)




脚用耐震固定金具(標準装備)

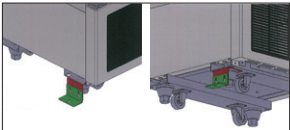

※別途取付作業費が発生します。

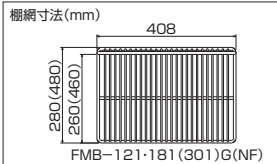**ECO PARTNER** **FMB-121G(NF)****ECO PARTNER** **FMB-181G(NF)****ECO PARTNER** **FMB-301G(NF)**

FMB-121・181(301)G(NF)

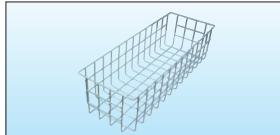

血液バッグ収納バスケット(オプション)
FMB-121G(NF)/181G(NF)用
(内寸)W150.5×D254×H117mm
標準価格:4,000円(税抜)
FMB-301G(NF)用
(内寸)W150.5×D454×H117mm
標準価格:4,700円(税抜)

特 徴

- 横幅50センチで省スペース設置が可能
- 内扉を設けず、ワンアクションで素早く血液製剤の出し入れ可能
- 背面用転倒防止用金具・脚用耐震固定金具標準装備
- 測定孔標準装備
- 施錠装置標準装備

※本製品は医療機器です。販売にあたっては、高度管理医療機器等、販売業・賃貸業の許可が必要です。
※本製品は改造対応ができません。

	型 番	有効内容積	外形寸法 ※()内 突起物含む最大寸法	質 量	標準価格(税抜)
血液用冷蔵庫	FMB-121G(NF) ※1	121L	W500×D450(548)×H1,430mm	66kg	520,000円
	FMB-181G(NF) ※1	179L	W500×D450(548)×H1,870mm	77kg	636,000円
	FMB-301G(NF) ※1	303L	W500×D650(748)×H1,870mm	90kg	774,000円

※1 転倒防止処置必須
※全機種転倒防止処置を推奨します。



冷媒ガス漏れ10年保証対象

ノンフロン冷媒採用
※FMB-G(NF)シリーズはHFO冷媒(R1234yf)です。

車載コールドボックス

製品の詳細はこちら▶

**-20℃~38℃**

DC電源タイプ(シガーソケット給電)

バッテリータイプ(単相100V充電)



T0022/FDH



T0032/FDH



T0056/FDH Auto



T0082/FDH Auto

特 徴

- DCタイプは車のシガーソケットから給電(オプションのアダプターにて100V給電にも対応可能)
- バッテリータイプは取り外し可能なバッテリーをAC100Vで事前充電することで輸送中も冷却運転できます
- 専用アプリを使用し、Bluetooth接続でHACCP温度管理が可能
- 約8時間でフル充電完了、駆動時間は約7時間(T0056/FDHの場合。試験条件:外気温30℃、冷凍運転)



T0056/FDH Auto

	型 番	有効内容積	外形寸法	質 量	標準価格(税抜)
車載コールドボックス	T0022/FDH	DC電源タイプ	18L	W375×D585×H480mm	25kg
	T0032/FDH	DC電源タイプ	25L	W390×D670×H480mm	25kg
	T0056/FDH Auto	バッテリータイプ	46L	W495×D800×H500mm	40kg
	T0082/FDH Auto	バッテリータイプ	64L	W560×D940×H550mm	40kg

コールドベンチ




製品の詳細はこちら▶

**冷凍・冷蔵切替式**
冷凍-20℃・冷蔵2~8℃

FMC-62PNBSAXL

●パトライト装備

冷凍仕様が冷蔵仕様かを確認

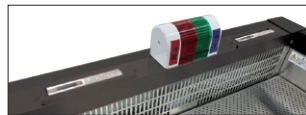

●排水蒸発装置

蒸発性能を2倍にアップ及び排水処理タンク併用により、排水処理作業性向上



●見やすい温度表示



●エコカバー

使いやすく優れた収納性
待機時に省エネ

特 徴

- 低温を維持しながらの作業に最適
- インバーター式で省エネ・急速冷却・安定制御を実現
- 手すり部分をフラットにし作業性の向上
- エコカバーを標準装備。待機時の冷気漏れ抑制
- ワンタッチで冷凍・冷蔵の温度切り替え可能

	型 番	ワークエリア	外形寸法 ※()内 突起物含む最大寸法	質 量	標準価格(税抜)
コールドベンチ	FMC-42PNBSAXL	W986×D766×H150mm	W1,200×D900×H800mm	140kg	1,260,000円
	FMC-62PNBSAXL	W1,586×D766×H150mm	W1,800×D900×H800mm	165kg	1,592,000円

オプション
P21・22※仕様図(一部機種を除く)はホームページからダウンロードできます。
URL <https://www.galilei.co.jp>

卓上型クリーンベンチ(垂直気流型)〈清浄度：ISO-5(クラス100)〉

製品の詳細はこちら▶



FMM-240TCB

特 徴

- 耐久性の高いガラス製シャッターを採用
- DCターボファンを採用し、省エネと低騒音を実現
〈FMM-240TCB:54dB(JIS規格に基づく試験)〉
- 作業姿勢を考慮し、傾斜構造のシャッターガラス面を採用
- スイッチとコンセントを前面外部に配置し、操作性を向上

※本製品は安全キャビネットとしてご使用いただけません。

フットスイッチ付きガスバーナー標準装備



ガスホース接続口

※ご注文時、都市ガスかプロパンガスかをお知らせ下さい。

	型 番	ワークエリア	外形寸法 ※()内 突起物含む最大寸法	質 量	標準価格(税抜)
卓上型クリーンベンチ	FMM-240TCB	W995×D510×H555mm	W1,000(1,050)×D575×H825mm	57kg	682,000円
	FMM-320TCB	W1,295×D510×H555mm	W1,300(1,350)×D575×H825mm	71kg	847,000円

純水生成装置

製品の詳細はこちら▶



FMP-0110

特 徴

- イオン交換膜と逆浸透膜による純水生成
(1μS /cm以下の純水を生成)
- コンパクトな卓上タイプなので、省スペース
- 水量が多い(36ℓ/hの生成能力)
- 器具洗浄、自動分析、染色水用、細胞培養、試薬調整などに使用可能

	型 番	貯水タンク	外形寸法	標準価格(税抜)
純水生成装置	FMP-0110	φ279×H368	W320×D380×H388mm	550,000円
	FMP-0130	φ389×H626	W320×D380×H388mm	583,000円

ノンフロン冷媒採用 業務用冷蔵庫



The Galilei シリーズ

-5℃~10℃
(1℃単位)

フロンラベル
S
(ノンフロン)
地球温暖化への影響



GRD-120RX-F



GRD-180RX

特 徴

- ノンフロン冷媒(R1234yf)採用
- はめ込み式扉3重パッキンを採用し冷気漏れの軽減と清掃性の向上をしています
- 定期的に霜取りが入ります

	型 番	有効内容積	外形寸法	質 量	標準価格(税抜)	冷 媒	封入量	GWP
業務用冷蔵庫	GRD-120RX-F	1,088L	W1,200×D800×H1,950mm	125kg	1,326,000円	R1234yf	135g	1
	GRD-150RX-F	1,379L	W1,490×D800×H1,950mm	145kg	1,505,000円	R1234yf	140g	1
	GRD-180RX	1,674L	W1,790×D800×H1,950mm	160kg	1,553,000円	R1234yf	140g	1

※上記機種以外にも様々なサイズがございます。※この製品は排水設備が必要です。

ノンフロン冷媒採用 スライド扉リーチインショーケース キュービックタイプ (ドリンク用)



3℃~10℃
(1℃単位)

フロンラベル
S
(ノンフロン)
地球温暖化への影響



CRC-060GSWSRX



CRC-080GLWSRX

特 徴

- ノンフロン冷媒(R1234yf)採用
- フィルター清掃不要

	型 番	有効内容積	外形寸法	質 量	標準価格(税抜)	冷 媒	封入量	GWP
スライド扉リーチイン ショーケース キュービックタイプ	CRC-060GSWSRX	141L	W630×D550×H1,080mm	55kg	214,000円	R1234yf	100g	1
	CRC-080GSWSRX	173L	W750×D550×H1,080mm	60kg	252,000円	R1234yf	120g	1
	CRC-080GLWSRX	265L	W750×D550×H1,410mm	70kg	310,000円	R1234yf	120g	1
	CRU-060GSWSRX	109L	W630×D450×H1,080mm	50kg	196,000円	R1234yf	100g	1
	CRU-080GSWSRX	134L	W750×D450×H1,080mm	55kg	212,000円	R1234yf	100g	1
	CRU-080GLWSRX	205L	W750×D450×H1,410mm	65kg	271,000円	R1234yf	120g	1

製氷機 (チップアイス・フレークアイス) **MIRACLEAR**



FIC-100CTX



FIC-120FTLX

特 徴

- ノンフロン冷媒(R1234yf)採用
- 節水性と省電力に優れています
- 汚れがつきにくく、拭き取りやすいクリアコーティングを採用しています
(外装前パネル・扉・機械室パネル)

	型 番	製氷能力	貯水量	外形寸法	質 量	標準価格(税抜)
製氷機(チップアイス)	FIC-100CTX	100kg	約34kg	W600×D600×H800mm	63kg	1,121,000円
	FIC-100CTLX	100kg	約63kg	W900×D600×H800mm	72kg	1,220,000円
製氷機(フレークアイス)	FIC-120FTX	120kg	約24kg	W600×D600×H800mm	63kg	1,039,000円
	FIC-120FTLX	120kg	約46kg	W900×D600×H800mm	72kg	1,143,000円

※上記機種以外にも様々なサイズがございます。 ※この製品は給排水設備が必要です。

コールドロッカー



2℃~12℃
(1℃単位)
全室同一温度



HPK-8R9



内箱の取り外しが簡単

特 徴

- 8室個別管理型の冷蔵ロッカー
- 手間の要らない全自動霜取り式
- 食品の一時保冷などに

	型 番	有効内容積	外形寸法	質 量	標準価格(税抜)
コールドロッカー	HPK-8R9	36L×8室(計288L)	W1,000×D544(569)×H1,815mm	145kg	756,000円



冷媒ガス漏れ10年保証対象



ノンフロン冷媒採用



※仕様図(一部機種を除く)はホームページからダウンロードできます。
URL <https://www.galilei.co.jp>

蓄冷剤用急速凍結専用庫

冷媒ガス漏れ
10年保証

-40℃~-20℃
R-448A採用




GKD-082FMD1-S

- 特 徴
- 蓄冷剤は再凍結して何回も使えて経済的
氷やドライアイスよりランニングコストが低減できます



蓄冷剤の一例
CAH-500

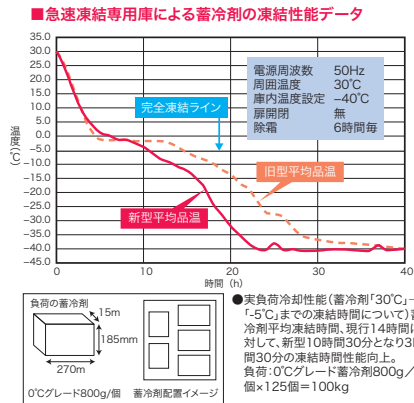

	型 番	有効内容積	外形寸法	質 量	プラグ形状	標準価格(税抜)
蓄冷剤用急速凍結専用庫	GKD-082FMD1-S	475L	W755×D800(870)×H1,950mm	125kg	㊤ 三相200V	2,079,000円

※この製品は排水設備が必要です。

ブラストチラー/ショックフリーザー

冷媒ガス漏れ
10年保証

-40℃~10℃

- 特 徴
- 熱い食材・試料等を急速に冷却・凍結します
 - 独自の吸い込み循環方式で優れた冷却性能を発揮します
 - 庫内構造の清掃性を高め、庫内乾燥モードも標準装備しています
 - USBポート(オプション)で、運転データの保存が可能です



QXF-012SFSV2



QXF-006SFLT2

	型 番	収容能力	外形寸法	質 量	プラグ形状	標準価格(税抜)
ブラストチラー/ ショックフリーザー	QXF-012SFSV2	1/1ホテルパン又はグリッド 12枚	W770×D880(932)×H1,882mm	225kg	㊤ 三相200V	3,520,000円
	QXF-006SFLT2	1/1ホテルパン又はグリッド 6枚	W1,200×D750(802)×H800mm	145kg	㊤ 三相200V	1,980,000円

※この製品は排水設備が必要です。※写真はホテルパン(オプション)付きです。

医療医薬向けクリーンルーム
パネル内装システム

PURE CIS



細胞培養室

- 特 徴
- 過酸化水素ガス除染に対する耐久性に優れたカラー鋼板
ビュアホワイト色を採用
 - パネル結合部は清掃性に配慮したフラットな仕上がりを実現
 - クリーンルーム内のコーナーや天井廻り縁に樹脂製コーナー
R材を採用し、清掃性を向上
 - パネル厚より薄いアルミ製入り巾木を採用し、埃溜まりの発
生を軽減
 - 気密性能試験 A-4等級をクリアした凸凹の少ないフルフラット
建具を採用

プレハブ型冷蔵庫・冷凍庫・恒温庫
(インキュベーター)



製品の詳細はこちら▶



冷凍機一体型タイプ



冷凍機別置型タイプ

- 特 徴
- グループ会社 ガリレイパネルクリエイト(株)
による、安心・安全なパネル施工
 - ご希望のサイズに設計可能
 - 多種多様な用途に対応可能

■ 冷凍機一体型と冷凍機別置き型の違い

	一体型	別置型
メリット	・工事コストが安い	・容量・サイズの自由度が高い ・室内に熱がこもりにくい
デメリット	・室内に排熱がこもり、高圧カット等が起こる可能性がある ・容量・サイズの選択肢が狭い	・工事コストがかかる

プレハブ庫 構造

●冷蔵庫 -3℃以上 ●冷凍庫 -20℃~-18℃

パネル組立式だからサイズ、温度帯、設置条件など
お客様のご要望に合わせてフレキシブルに対応可能。


用途に合わせた高品質パネル

●冷蔵庫…フラットパネル仕様(パネル厚44mm) ●冷凍庫…フラットパネル仕様(パネル厚100mm)

間取り寸法一覧

※別寸もご相談に応じます。

●庫内高さ
・1,900mm
・2,200mm
・2,400mm

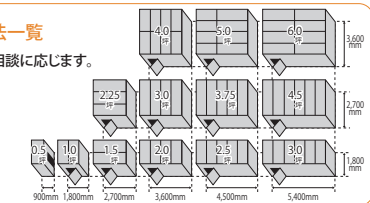

温度計 (デジタルはオプションです)

ドアスイッチ (オプション)
ドアの開閉に連動してファンの
運転を制御する省エネ機器です。

庫内灯 (庫内側)

白熱灯型LED
直管型LED
(共に低温型、防滴型)も
準備できます。

リリーフ弁

庫内空気の膨張を調整する圧力
調整弁(冷凍庫のみ)

押し棒 & 安全脱出ハンドル

万が一、閉じこめられた場合に
中から簡単に扉を開けることが
できます。

省エネカーテン (オプション)

商品の出し入れ時、庫内からの
冷気もれを最小限におさえます。

クーリングユニット

(冷凍機一体型の場合)

プレハブコントローラー

アラーム4 (オプション) 温度異常・火報・監禁警報を集中監視

壁パネル

天井パネル

手動片引スライド扉

コーナーパネル

スノコ (樹脂製)

床パネルを保護し、冷気の循環
をよくなります。(床パネル付のみ)

床パネル

樹脂ベース

庫内灯スイッチ

標準ハンドル

用途に応じて選べる扉

片開き扉、両開き扉、片引スライド扉(手動・自動)、
小扉、スイング扉


パネル表面材は、カラー鋼板仕様(ソフアイボリー色)
の他に、ステンレス鋼板もご用意しています。

- 主な特長
- ガリレイならではの省エネ設計**
プレハブコントローラーにより、庫内温度に合
わせて冷凍機を最適に制御。庫内温度を一定に
キープします。過剰な冷却を防ぎ省エネになり
ます。
※セレクトタイプの場合
 - オーダーメイド設計**
パネル組立式なので設置場所のスペースに
合わせて自由に設計できます。
 - スピーディな施工**
パネル組立式なので工期が短くスピーディに
プレハブ冷蔵庫・冷凍庫が完成します。
 - 4選べる温度帯**
貯蔵物に合わせて、冷蔵から冷凍までさまざ
まな温度帯に対応できます。
●冷蔵庫: -3℃以上
●冷凍庫: -20℃~-18℃
その他温度帯もご相談ください。
 - 5気配り安全設計**
庫内の閉じ込めを防止する安全脱出ハンドル
や庫内で安全に作業できる庫内灯など随所に
安全設計を施しています。
 - 6ノンフロンパネル『econeal』**
新発泡剤「HFO(ハイドロフルオロレフィン)」
に切り替え、品質と環境配慮を両立させた高
性能なノンフロンパネル『econeal(エコネア)』
シリーズを使用しています。

プレハブ冷蔵庫・冷凍庫導入事例

病院

冷蔵庫
薬剤・薬品の保管・厨房での食材保管

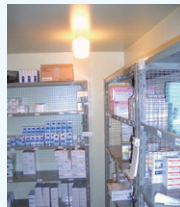

製薬会社

冷蔵庫
薬剤の冷蔵保管

冷凍庫
新薬の保管



食品工場

◆トータルプランニングも可能です

冷蔵庫
食品の保管

冷凍庫
食品の冷凍保管

恒温庫
食品の発酵




大学

冷蔵庫
薬剤・検体の保管

低温実験室
低温下での研究

恒温庫
育成・培養

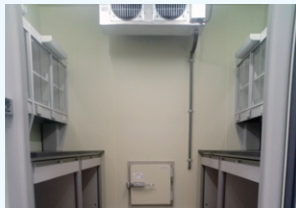

オプション
P21・22

※仕様図(一部機種を除く)はホームページからダウンロードできます。
URL: <https://www.galilei.co.jp>

冷媒ガス漏れ
10年保証

冷媒ガス漏れ10年保証対象

温度測定関連

ミニ温度計データロガー
testo 174Tシリーズ

温度センサ内蔵の1ch温度ロガー



●低温は-30℃まで測定可能

温度計データロガー
testo 175T1

サーミスタ内蔵の1ch温度ロガー



●低温は-35℃まで測定可能
●SDカードでのデータ収集対応

温度モニタリングシステム
testo Saveris

プレハブ冷蔵庫などから離れた場所での温度監視に



●無線で離れた場所からPCで温度監視
●警報機能有り
※カスタマイズ商品です。お客様が管理したい内容をご連絡下さい。

	型 番	測定範囲	外形寸法	電池寿命	標準価格(税抜)
温度測定関連	testo 174T(ソフトウェア対応)	-30℃~+70℃	60×38×18.5mm	約500日	17,000円
	testo 174T BT(モバイルアプリ対応)	-30℃~+70℃	60×38×18.5mm	約500日	23,000円
	testo 175T1	-35℃~+55℃	89×53×27mm	約3年	31,000円

※testo 174Tシリーズのデータロガーには白色と黒色の2種類があります。 ※様々なサイズがございます。

HACCP EXaround IoTで食の安全管理を確実に
HACCP管理サポートシステム

温度管理プラン

冷機器温度の自動記録

店舗の冷機器の温度を24時間自動で監視・記録。異常発生時の自動通報を行います。

データはWEBで閲覧

クラウド上にデータが蓄積されるため、本部や店舗などどこからでも同じデータを閲覧可能。

24時間365日監視・記録

自動記録で信頼性の高い記録データを実現し、手作業による記録漏れやミスを解消!温度以外にも機器の状態も記録します。

異常時にはメールで通知

機器の異常が発生した場合にはメールでアラート発信。設備管理における人手不足の解消と商品ロスを防ぎます。

データはダウンロード可能

必要な時に必要な分だけダウンロードして利用可能。ペーパーレスで管理業務の軽減につながります。

衛生管理プラン

食品温度の記録管理

専用温度計で測定した商品の温度データを自動で記録。作業者や食品などのデータと共にクラウドに記録されます。

衛生管理の記録管理

タブレットにて個人衛生記録や施設の清掃記録などを行うことでクラウドに記録されます。

各種マスター管理


- 記録データの蓄積
- 帳票出力

各種HACCP手引書に準拠(対応手引書は随時追加)

- 実施結果の電子承認機能を実装
- 組織的HACCP管理をサポート

製薬業界向け機器集中管理システム
トリプルエス
SSSマスター

- 製薬業界向け電子データ規格 FDA 21CFR Part.11 準拠
- 施設内の全ての機器を1台のパソコンで効率的な一括管理
- データの自動保存による、記録漏れ等のリスク回避
- 各測定値の異常をリアルタイムに監視
- 改ざん防止機能、閲覧権限設定ほか

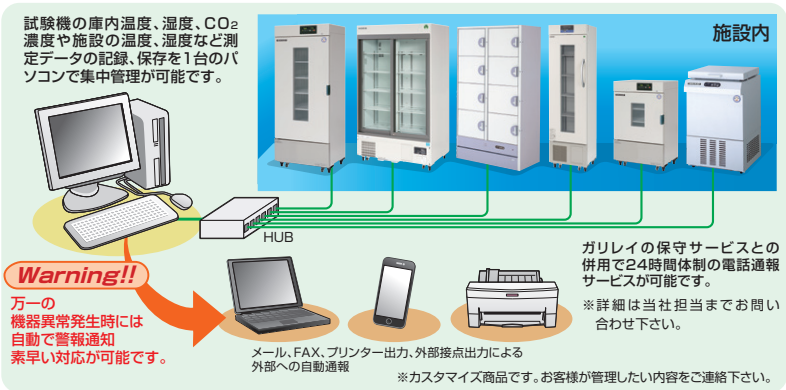

保守契約のご案内

製品を安全に安心してご使用いただくため、弊社ではお客様に保守契約をお奨めしております。

弊社顧客管理により、突然のトラブル時にも迅速な対応が可能。365日体制でお応えします!!

常に安心してお使いいただけます。

契約のメリット

- ①年間契約により年1回の定期点検を実施、故障を事前にチェックします。
- ②点検リストにより、迅速かつ的確な修理を実施、安全性を高めます。
- ③損害に陥る危険性のある故障を限りなく減らし、安心してご使用になれます。
- ④定期点検の実施により、消費電力低減と機器の高寿命化を図ります。
- ⑤年間契約の為、年間の予算計上ができ、計画性を持って設備投資ができます。
- ⑥一年間契約で更新の選択は自由です。また、保証期間中の契約が可能です。

定期点検により運転状況をチェック

故障を未然に防止

故障時の修理代金無料

ランニングコストの低減



バリデーションサポートサービスのご案内

製品性能(試験・検査)の品質の適切性を据付(IQ)/稼働(OQ)の各段階で立証し文書化し、書類にて報告します。

打ち合わせ	測定温度、測定箇所、測定時間、判定基準等を確認。
計画書提出	打ち合わせ内容に基づいてIQ・OQ実施計画書を作成/提出し、お客様に確認していただく。
IQ/OQ実施	計画書の内容に沿ってIQ/OQ作業を実施。 IQ：据付時適格性確認 OQ：稼働性能適格性確認
報告書提出	測定データをもとに報告書を作成、提出。 提出書類：報告書、記録計校正証明書、センサー校正証明書、温度測定データ等

商品名	薬用保冷库、薬用冷凍冷蔵庫、低温インキュベーター、超低温フリーザー、薬用冷蔵ショーケース、メディカルフリーザー、コールドベンチ、その他
測定点	お客様のご要望により、別途打合
料 金	お客様のご要望により、別途見積

お客様のご要望にお応えし、選べるパターンをご用意。

測定点数、温度帯などお客様のご希望に合ったご提案が可能です。

	ライトバリデーション	ベーシックバリデーション
IQ点検内容	製品点検(マイコン設定確認は行わない)	製品点検(マイコン設定確認も含む)
OQ点検内容	目視による温度確認チェックは除く	目視による温度確認チェックも含む
打合せに合わせた書類変更	不可	可

その他マッピング対応も可能です。お気軽にご相談ください。

機器導入前チェック事項

- ①保管物の保管条件をご確認ください。
- ②有効内容積の6割を目安に製品の必要な大きさを選んでください。保管物の詰めすぎは、保管物が冷えなかったり、消費電力量が大きくなったりといった事が考えられます。
- ③設置環境をご確認ください。空調の有無、夜間空調の使用・不使用など。高温・多湿は製品の寿命を縮め、結露、霜付きが起きやすくなる原因となります。
- ④電源をご確認下さい。正常な運転を妨げる原因となります。
- ⑤コンセント形状をご確認下さい。
- ⑥機器の設置には単独回路が必要です。延長コードのご使用、タコ足配線のご使用はお控えください。機器の故障の原因となります。
- ⑦扉の開きをご確認下さい。常駐製品は右開き扉・左開き扉の変更が可能です(出荷時のみ:オプション)。
- ⑧設置スペース及び隣接する機器が高温になるものかをご確認下さい。
- ⑨搬入経路をご確認下さい(エレベーターの使用可否、扉の開閉など)。

○搬入をご希望の場合、搬入条件をお知らせください。

●FMSシリーズ オプション



サーモレコーダー
(記録用紙 1年分付き)



麻薬金庫
大型:W305×D214×H363mm
小型:W255×D150×H215mm




遮光フィルム仕様



ガラスなし扉仕様




右開き仕様
標準左開きの逆となります。

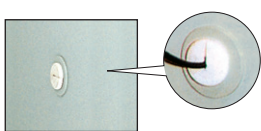


測定孔




背面用転倒防止金具 (標準装備)

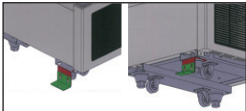


脚用耐震固定金具 (オプション)
※別途取付作業費が発生します。
※血液用冷蔵庫はどちらも標準装備です。

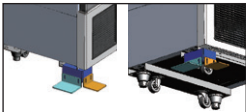

脚用転倒防止金具アンカー不要仕様 (オプション)
※別途取付作業費が発生します。

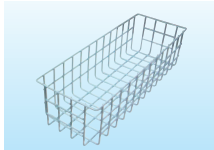


血液バッグ収納バスケット
小型:W162.5×D266×H123mm
標準価格 4,000円 (税抜)
大型:W162.5×D466×H123mm
標準価格 4,700円 (税抜)

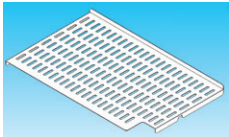

フラット棚
(小瓶用バンチングプレート)



スライドラック仕様
●薬品やサンプルの出し入れに便利です。
※スライドラックは右側半分のみです。
※FMS-1004Gは左側半分のみです。

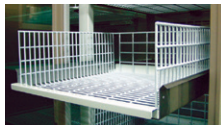

保冷枕収納棚
○FMS-F155GSX用
標準価格:10,000円 (税別)
保冷枕が10個収納できます
○FMS-F305GX用
標準価格:20,000円 (税別)
保冷枕が20個収納できます
※保冷枕はオプションです。

	標準価格 (税抜)	薬用保冷库 MediFridge				スリム型薬用保冷库 MediFridge	薬用保冷库		薬用冷蔵ショーケース (スライド仕様共通)	
		FMS-305GUX, 505GX, 1004G	FMS-F155GSX	FMS-F305GX	FMS-F405GX	FMS-125GSX, 175GSX, 305GSX	FMS-650L	FMS-1400L	FMS-300GH,400GH,500GH,800GH, 305GH×4,405GH×4,505GH×4,805GH×4 (SR機種共通)	
サーモレコーダー	61,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	
サーモレコーダー取付金具	8,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	
麻薬金庫 (大型)	※1 32,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	
麻薬金庫 (大型) 取付金具	7,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	
麻薬金庫 (小型)	※2 30,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	
麻薬金庫 (小型) 取付金具	6,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	
遮光フィルム仕様 (2枚扉)	42,000円	※3	×	○	○	×	×	○	○	
遮光フィルム仕様 (1枚扉)	21,000円	×	○	×	×	○	○	×	×	
ガラスなし扉仕様	0円	○	○	○	○	○	○	○	×	
右開き仕様	右記参照	—	14,000円	—	—	7,000円	11,000円	—	—	
測定孔	25,000円	○	○※4	○※4	○※4	○	—	—	○	
バンチングプレート	↺	○	○	○	○	○	○	○	○	
スライドラック	77,000円	↺	×	×	×	↺	×	×	↺	
外部警報接点出力 (無電圧接点)	5,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	
停電警報ブザーキット	15,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	
脚用耐震固定金具 (2個セット)	10,400円	○	○	○	○	○	↺	↺	○	
脚用転倒防止金具アンカー不要仕様	54,000円	○	○	○	○	○	↺	↺	○	
棚網 (棚受け4個付き)	右記参照	305GUX 2,500円 505GX 3,200円 1004G 5,400円 (中室) 4,900円 (左室)	冷蔵室 3,400円 冷凍室 3,000円		冷蔵室 4,000円 冷凍棚板 9,000円	125GSX 2,500円 175GSX 3,000円 305GSX 3,000円	10,400円	10,800円 (左右ご指定下さい)	300GH 3,900円 400GH 4,900円 500GH 4,800円 800GH 6,000円 (左右ご指定下さい)	
カラーバリエーション	0円	○	○	○	○	○	×	×	×	

※1: 2025年10月以降の価格です。2025年9月までは標準価格27,000円 (税抜) です。
※2: 2025年10月以降の価格です。2025年9月までは標準価格25,000円 (税抜) です。
※3: FMS-1004G遮光フィルム仕様 (3枚扉) は63,000円 ※4: 冷凍室は取付位置の指定はできません。
○: オプション対応可能 —: 標準で取付け ×: 対応不可
↺: 当社担当にお問い合わせください。

●小型薬用保冷库 オプション



小分け収納ケース
収納例



鍵付収納セット
使用例

		トレイ内寸	カラー	標準価格(税抜)
小分け 収納ケース	AT-8	W113×D73×H58	クリアホワイト ライトグリーン ライトイエロー ライトブルー ピンク	240円
	AT-10	W240×D73×H59		530円
	AT-11	W56×D70×H58		130円
	AT-14	W235×D75×H42		360円
		引き出し内寸	カラー	標準価格(税抜)
鍵付き 収納セット	①	W213×D161×H110×1個	トウメイ/アンバー	28,000円
	②	W103×D160×H112×2個		28,000円
	③	W103×D160×H112×1個 W103×D162×H51×2個		41,000円
	④	W103×D162×H51×4個		49,000円
サーモレコーダー	61,000円			
サーモレコーダー取付金具	8,000円			
右開き仕様	7,000円			
停電ブザーキット	15,000円			
カラーバリエーション	0円			
測定孔	×			

●FMUシリーズ オプション

	FMU-054I	FMU-134I	FMU-204I	FMU-264I	FMU-404I	FMU-100I-HC	FMU-180I-HC	FMU-230I-HC	FMU-380I-HC
遮光板	6,500円	8,600円		14,000円		8,600円		14,000円	
右開き仕様	11,000円								
照明タイマー仕様	32,000円								
鍵付き仕様	14,000円	—	—	—	—	—	—	—	—
架台 (別途送料)	50,000円	70,000円	85,000円	×	×	70,000円	85,000円	×	×
ガラスなし扉仕様	0円								
棚網 (棚受け4個付)	3,300円	4,200円	5,400円	4,200円	5,400円	5,600円	6,600円	5,600円	6,600円
脚用耐震固定金具 (2個セット)	×				10,400円				
外部警報出力	5,000円								
停電ブザーキット	15,000円								

表中の価格は標準価格 (税抜) — 標準装備 × 対応不可

●FMFシリーズ オプション

	標準価格 (税抜)	FMF-305FX	FMF-505FX	FMF-501FD, 505FDX	FMF-038F1	FMF-038F1-C
サーモレコーダー	61,000円	○	○	○※1	○	○
サーモレコーダー取付金具A	8,000円	○	○	○※1	×	×
サーモレコーダー取付金具B	22,000円	×	×	×	○	○
外部警報出力	5,000円	○	○	○	○	○
棚板 (棚受け4個付)	右記参照	6,400円	9,000円	9,000円	×	×
脚用耐震固定金具 (2個セット)	10,400円	○	○	○	×	×
扉ラッチハンドル仕様	↺	○	○	○	×	×
右開き仕様	右記参照	7,000円	7,000円	14,000円	7,000円	×
停電ブザーキット	15,000円	○	○	○	×	×
カラーバリエーション	0円	○	○	○	×	×
測定孔※2	↺	○	○	○	×	×

※1: 1室につきサーモレコーダーと取付金具が1個ずつ必要となります。 ○ 対応可能 × 対応不可
※2: 測定孔の取付位置は背面です。

●LABシリーズ オプション

■貯蔵ラック・ボックス (対象機種 LAB)

型 式	ラック寸法 (mm)	収 納	標準価格 (税抜)
KR-11	W140×D140×H610	11段収納ラック	25,000円
KR-06	W140×D140×H330	6段収納ラック	20,000円
KR-11D	W162×D151×H606	11段収納ラック	26,000円
KR-06D	W162×D151×H331	6段収納ラック	22,000円
KB-5D	W204×D156.5×H591	5段収納ボックス	28,000円
KB-3D	W204×D156.5×H355	3段収納ボックス	24,000円

■収納ラック・ボックス収容数

		LAB8	LAB11	LAB21	LAB31	LAB41
パターン①	KR-11	3	6	12	18	21
	KR-06	3	3	3	3	3
パターン②	KR-11D	2	4	8	10	14
	KR-06D	2	2	2	2	2
パターン③	KB-5D	2	4	8	10	12
	KB-3D	2	2	2	2	2

●FMDシリーズ オプション

※その他のオプションについては当社担当へお問い合わせ下さい。

■補助冷却装置



型式: RS-BUT1 (100V用)
RS-BUT2 (200V用)



型式: COB-UP1-JP (100V用)
COB-UP2-JP (200V用)

停電または冷凍機の故障など万一の際に
液化炭酸ガスをフリーザー庫内に噴射させ
庫内の温度上昇を防ぐための装置です。

型 式	アップライト型		チェスト型		COB-BUT1	COB-BUT2	COB-UP1-JP	COB-UP2-JP
	RS-BUT1	RS-BUT2	RS-BUY1	RS-BUY2				
適用機種	FMD-200D1	FMD-500E1 FMD-700E1	FMD-300D1	FMD-500D1 FMD-700D1	FMD-D350ESH	FMD-D520ETH	FMD-W330ESH	FMD-D600ETRL FMD-D700ETRL
作動温度	高温警報設定温度 (-70℃以上)							
取付位置	製品背面	製品背面	製品内蔵	製品内蔵	製品背面	製品背面	製品背面	製品背面
希望小売価格 (税抜)	¥341,000	¥339,000	¥299,000	¥315,000	↺	↺	↺	↺

注) 1. 液化炭酸ガスボンベ (サイホン管式) およびレギュレーターは、お客様にてご準備ください。
2. ボンベは、周囲温度30℃以下となるところに設置してください。(周囲温度が31℃を超えると急速に冷却能力を失います。)
3. 温度保持時間の目安は30kgボンベにて約7時間となります。(高温警報温度: -70℃, 周囲温度: -30℃の場合)

■貯蔵ラック

軽量で耐久性の高いアルマイト仕上げの
凍結チューブ収納ボックス専用アルミ製
ラックです。



型式-RS-R20T1



型式-RS-R10Y1

機 種	対応する貯蔵ラック	ラック最大収納数
FMD-500E1	RS-R20T1	計8個
	RS-R24T1	計8個
FMD-700E1	RS-R20T1	計12個
	RS-R24T1	計12個
FMD-200D1	RS-R07Y1	計15個
	RS-R054Y1	計15個
FMD-300D1	RS-R10Y1	計18個
	RS-R074Y1	計18個
FMD-500D1	RS-R12Y1	計21個
	RS-R094Y1	計21個
FMD-700D1	RS-R12Y1	計30個
	RS-R094Y1	計30個
FMD-D350ESH	RS-R16T1, RS-R20T1	各6個 計12個
FMD-D520ESH	RS-R20T1, RS-R24T1	各8個 計16個
FMD-W330ESH	RS-R16T1	計11個
FMD-D600ETRL	RS-R20T1	計19個
FMD-D700ETRL	RS-R20T1	計23個

型 式	ラック寸法	適合収納ボックス	収納量	希望小売価格 (税抜)
RS-R16T1	W140×D571×H225mm	W134×D134×H52mm	16	¥55,000
RS-R20T1	W140×D571×H281mm		20	¥58,000
RS-R24T1	W140×D571×H336mm	以下	24	¥64,000
RS-R07Y1	W162×D157×H399mm	W148×D148×H52mm	7	¥33,000
RS-R10Y1	W162×D157×H565mm		10	¥40,000
RS-R12Y1	W162×D157×H676mm	以下	12	¥42,000
RS-R054Y1	W162×D157×H408mm	W148×D148×H78mm	5	¥33,000
RS-R074Y1	W162×D157×H581mm		7	¥38,000
RS-R094Y1	W162×D157×H744mm	以下	9	¥42,000

収納ボックスは別売品です。(同一サイズの市販品が使用可能です。)

※引き出しタイプのラックもお取り扱いございます。
当社担当へお問い合わせください。

使用上のご注意:
本製品は、爆発性物質および可燃性物質、さらにそれらを含む物質及び
それらの残留・混入する物質の保存には絶対に使用しないでください。