

環境にやさしいノンフロン冷媒を採用!!
横幅50センチで省スペース設置可能。

医療機器

製造販売認証番号

FMB-121G(NF) 230AGBZX00033000

FMB-181G(NF) 230AGBZX00034000

FMB-301G(NF) 230AGBZX00032000

※特定保守管理医療機器(クラスII)に該当します。

充実した警報機能

温度異常(高温・低温)

発報までの温度・時間を設定可能。

設定温度 $4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、遅延0(約20秒)~99分

(初期設定 $4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、遅延 高温警報10分 低温警報30分)

ドア開放異常

90秒までは10秒単位で、

それ以降は30秒単位で

設定可能


(初期設定 30秒)

操作パネル▶



機能的な測定孔

挿入されるケーブルや電線の形状を選びません。

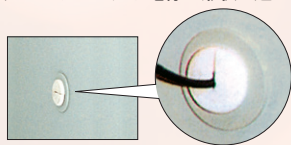

サーモレコーダー標準装備



庫内温度の履歴を自動記録
 できます。

(記録紙1年分(12コ)付)

キャスター付

設置、移動に便利な4輪
 自在キャスター付



鍵付

施錠装置付きで
 安全管理。



収納バスケット(オプション)

血液バッグの収納が容易になります。

(収納バスケットは製品内に1段2個、FMB-121G(NF)
 は6個、181G(NF)/301G(NF)は10個収納可能。)

●FMB-121G(NF)/181G(NF)用


血液バッグ400mlを最大4個収納

外形寸法:W162.5×D266×H123mm

内形寸法:W150.5×D254×H117mm

標準価格4,000円(税抜)

※写真は
 FMB-301G(NF)用

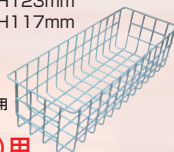

●FMB-301G(NF)用

血液バッグ400mlを最大7個収納

外形寸法:W162.5×D466×H123mm

内形寸法:W150.5×D454×H117mm

標準価格4,700円(税抜)

※血液バッグのサイズにより収容数は異なります。




転倒防止対策

背面用転倒防止金具(標準装備)



脚用耐震固定金具(標準装備)

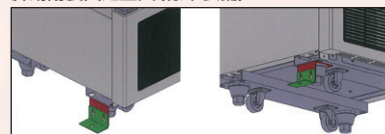

※別途取付作業費が発生します。



FMB-121G(NF)

外形寸法:W500×D450(548)×H1,430mm
 内形寸法:W420×D285×H897mm

標準価格:520,000円(税抜)

単相100V

有効内容積
 121L

温度
 4℃固定



FMB-181G(NF)

外形寸法:W500×D450(548)×H1,870mm
 内形寸法:W420×D285×H1,347mm

標準価格:636,000円(税抜)

単相100V

有効内容積
 179L

温度
 4℃固定



FMB-301G(NF)

外形寸法:W500×D650(748)×H1,870mm
 内形寸法:W420×D485×H1,347mm

標準価格:774,000円(税抜)

単相100V

有効内容積
 303L

温度
 4℃固定

血液用冷蔵庫

FMB-121G(NF)

製造販売認証番号 230AGBZX00033000

FMB-181G(NF)

製造販売認証番号 230AGBZX00034000

FMB-301G(NF)

製造販売認証番号 230AGBZX00032000

棚網寸法(mm)

408

280(480)
260(460)

12.7

FMB-121・181 (301)G(NF)

■電源コンセント形状
●接地2極15A125V

- ・コンセント形状をご確認ください。
- ・機器の設置には単独回路が必要です。延長コードのご使用、タコ足配線等のご使用はお控えください。機器の故障の原因となります。

設備に関する注意事項

ノンフロン製品は、可燃性物質を冷媒に使用しております。万が一、冷媒が漏れたときも安全にお使い頂くために、最小設置床面積以上の場所に設置してください。

可燃性物質

$\geq 3.3\text{m}^2$
最小設置床面積

当社では安全性を担保する考えから、一般社団法人日本冷凍空調工業会の規格^(※1)に準拠しています。

※1 一般社団法人日本冷凍空調工業会 JRA4078
「可燃性冷媒を使用した内蔵式冷凍冷蔵機器の冷媒漏えい時の安全機能要求事項」

MD C-221