GALILEI
Be cool, Be alive.

卓上型クリーンベンチ
FMMシリーズ

汎用的なクリーンベンチの作業性・操作性を高め、幅1,000mmタイプ・幅1,300mmタイプの2機種をラインアップ!!

ISO-5（クラス100）　**不織布プレフィルター**　**垂直気流型**







幅1,000mmタイプ

FMM-240TCB

標準価格：751,000円（税抜）

外形寸法：1,000×575×825mm
ワークエリア寸法：995×510×555mm

幅1,300mmタイプ

FMM-320TCB


標準価格：932,000円（税抜）

外形寸法：1,300×575×825mm
ワークエリア寸法：1,295×510×555mm

- DCターボファンを採用し、省エネと低騒音を実現。
  〈FMM-240TCB:54dB（JIS規格に基づく試験）〉
- 作業姿勢を考慮し、傾斜構造のシャッターガラスを採用。
- 作業時の入射光を考慮し、殺菌灯・蛍光灯を前面上部に配置。
- スイッチとコンセントを前面外部に配置し、操作性を向上。
- レベル調整と設置面への傷つき防止に設置用アジャストを採用。
- 省エネ化・チラつき防止のために蛍光灯用インバーター安定器を採用。
- 耐久性の高いガラス製シャッターを採用。

特徴


■ 低騒音DCターボファン採用

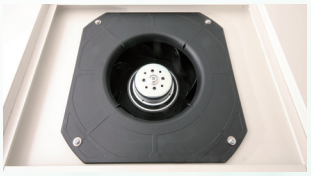

■ 傾斜構造



■ 殺菌灯標準装備

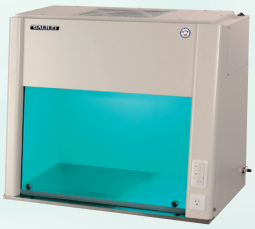

■ スイッチ・コンセント 前面設置



■ 設置用アジャスト



■ フットスイッチ付き
ガスバーナー標準装備




※ご注文時、都市ガスかプロパンガスかをお知らせ下さい。





ガスホース接続口

FMM-240TCB

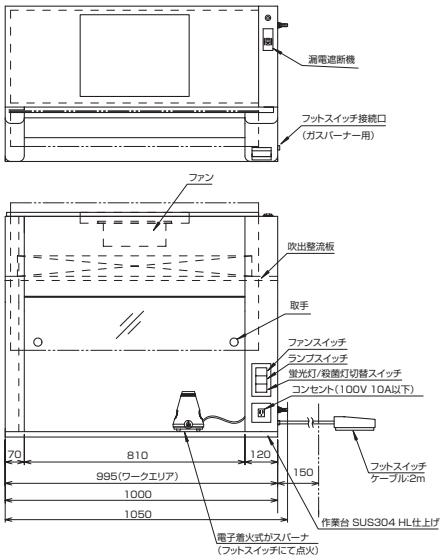

FMM-320TCB

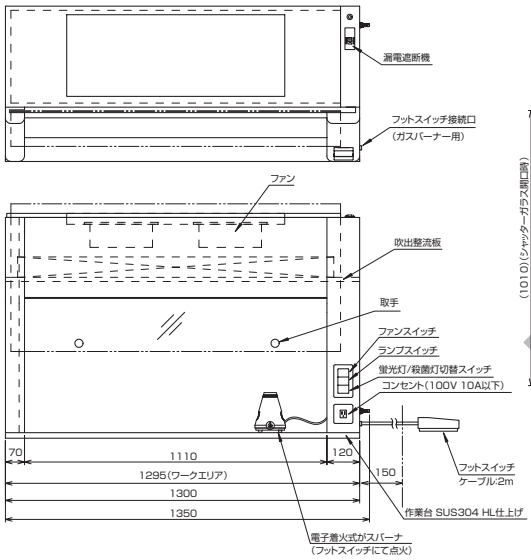

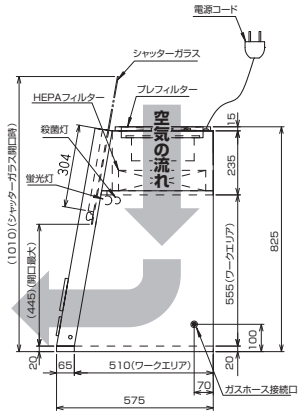

機種名		FMM-240TCB	FMM-320TCB
外形寸法(mm)（幅×奥行×高さ）		1000(1050)×575×825	1300(1350)×575×825
全高寸法(シャッターガラス開口時)(mm)		1010	
ワークエリア寸法(mm)（幅×奥行×高さ）		995×510×555	1295×510×555
外装		鋼板：ポリエステル樹脂粉体塗装	
内装		底板：SUS鋼板　ヘアライン仕上げ　　内装鋼板：ポリエステル樹脂粉体塗装	
前面シャッター		セミ強化ガラス	
メインフィルター	集塵効率	99.99%以上(0.3μm粒子)	
	種類	HEPAフィルター	
プレフィルター		不織布	
清浄度		ISOクラス5(クラス100)（周囲環境：ISO-クラス8の場合）	
殺菌灯		15W×1本	20W×1本
蛍光灯		32W×1本	40W×1本
吹出し風速		0.4m/s以上(初期値)	
電源		単相100V 50Hz/60Hz	
電源コード		2極接地極付プラグ　　機外長 2m	
消費電力(W)		85	113
製品質量(kg)		57	71
許容電圧範囲(V)		90～110	
使用周囲温度(℃)		5～35	
使用周囲湿度		85%RH以下	

消耗品


UVランプ
蛍光灯
HEPAフィルターユニット※

※HEPAフィルター、プレフィルター、交換作業費別途

消耗品交換時期の目安

UVランプの交換時期…約3,000時間
蛍光灯交換時期…約12,000時間
HEPAフィルターユニット交換時期…年1回点検(0.3m/s以下で交換)


不織布プレフィルター

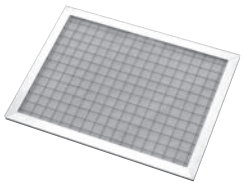

ほこりを掃除機でとって頂き、水洗いすることで長くお使い頂けます。

接地形2極用プラグ標準装備

感電防止などの安全性の向上

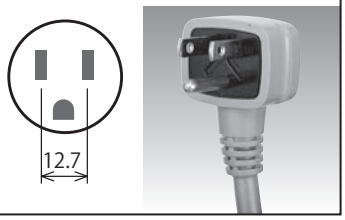

全国70カ所以上の GALILEIのサービスネットワーク

万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

GALILEI
Be cool, Be alive.

フクシマガリレイ株式会社

FMS担当営業拠点　このカタログに掲載されている商品の詳細については次の営業拠点にお問い合わせください。

本社・FMS事業部(大阪)　(06)6477-2121　大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
FMS事業部(東京)　(03)6361-1956　東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル
北海道支店(札幌)　(011)833-1211　北海道札幌市白石区中央三条1-1-15
南東北支店(仙台)　(022)259-1671　宮城県仙台市宮城野区中野1-5-14
中部支社(名古屋)　(052)559-2940　愛知県名古屋市中区金山5-13-24
中四国支社(岡山)　(086)245-0551　岡山県岡山市北区中仙道1-1-11
九州支社(福岡)　(092)474-5881　福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27

ガリレイ未来医療国際拠点 GIFT
大阪府大阪市北区中之島4-3-51 中之島クロス 未来医療R&D センターリエゾンオフィス15階

●カタログ・仕様図のダウンロードは
URL https://www.galilei.co.jp

製品についてのお問い合わせ、ご注文は ——

⚠ 安全に関するご注意

●このパンフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管下さい。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

このパンフレットに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

●仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●本パンフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
■製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

ISO 9001:2015 認証取得　滋賀(水口)工場・岡山工場・関西技術部・SB事業部・東京技術部・東京工事部・中部技術部・西日本技術部
ISO 14001:2015 認証取得　滋賀(水口)工場・岡山工場・本社・東京・名古屋・福岡 関西サービスセンター・関東サービスセンター

本リーフレットの記載内容は2026年10月現在のものです。
(2610-00)G

リーフレットNo. MDC-186