

GALILEI

Be cool, Be alive.

超低温フリーザー Vital

検体や試料、医薬品等の保管に。


豊富なラインナップで用途に合わせたご提案が可能です。

－80℃仕様

－90℃仕様



FMD-D350ESH

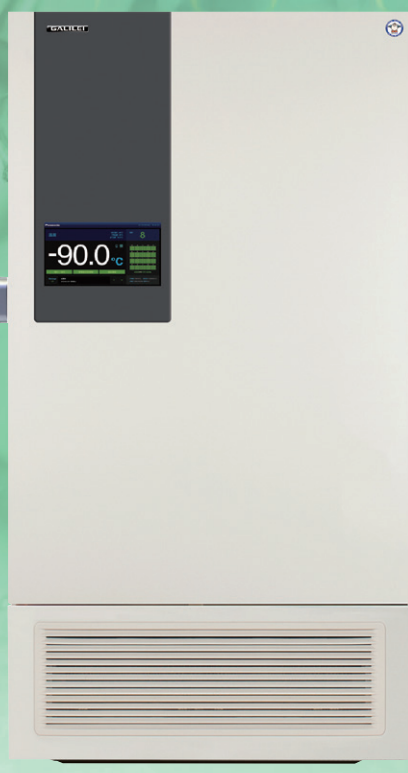

FMD-D600ETRL

仕様

機種名	FMD-D350ESH		FMD-D520ETH		FMD-W330ESH		FMD-D600ETRL		FMD-D700ETRL			
寸法	外形(mm) (幅×奥行×高さ) ※突起物含む	741×980×1,850		841×980×1,990		845×969×1,850		1,125×989×1,990		1,275×989×1,990		
	内形(mm) (幅×奥行×高さ)	490×600×1,200		630×600×1,380		490×600×1,140		770×600×1,280		920×600×1,280		
有効内容積(L)	350		519		330		603		706			
製品質量(kg)	250		290		258		359		377			
材質	外装	ポリエステル樹脂粉体塗装				垂鉛メッキ鋼板、ポリエステル樹脂粉体塗装						
	内装	ステンレス鋼板 SUS304										
	扉	ポリエステル樹脂粉体塗装										
	内扉	アクリル樹脂焼付塗装ABS樹脂パネル、2枚										
断熱材	真空断熱材+硬質発泡ポリウレタン				ステンレス製枠ABS樹脂パネル、2枚							
庫内温度制御範囲	－80～－60℃				－90～－50℃							
冷却装置	圧縮機公称出力	A回路450W B回路450W		A回路900W B回路900W		インバータ圧縮機		A回路1100W B回路1100W				
	凝縮器	フィンチューブ式				フィンレス銅管コンデンサー						
	冷却器	混合冷媒 (ノンフロン)				チューブオンシート式 HC冷媒 (ノンフロン)		混合冷媒 (フロン)				
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示				マイコン制御 タッチパネル液晶表示						
	冷凍方式	デュアル冷却方式				二元冷凍方式		デュアル冷却方式				
	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz		三相200V 20A 50/60Hz		単相100V 15A 50/60Hz		三相200V 20A 50/60Hz				
電源	適用コンセント	接地2P 15A 125V		接地3P 20A 250V		接地2P 15A 125V		丸端子				
	許容電圧範囲	90～110		180～220		90～110		180～220				
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A)	10.5/9.2		5.6/5.5		8.5/8.5		7.5/6.0		7.6/6.2	
		消費電力(W)	730/780		1,240/1,370		980/980		1,430/1,460		1,435/1,465	
	力率(%)	70/85		64/72		87/87		55/70		55/69		
使用周囲環境(℃)	温度：5～30℃ 湿度：80%以下				温度：10～30℃ 湿度：80%以下							
放熱量 50/60Hz	757/845W		1,928/2,206W		980/980W		1,435/1,465W		1,435/1,465W			
測定孔	直径25mm、2か所				直径17mm、3か所		直径17mm、2か所					
付属品	鍵1個、棚板3枚、霜取ヘラ1個				鍵1個、棚板3枚、霜取ヘラ1個		棚板3枚、霜取ヘラ1個					
警報内容	高温・低温・フィルタ点検サイン・扉開放警報・ガス漏れなど				高温・低温・停電・凝縮器高温保護など							

- 注) 1.冷却性能は、庫内温度(温度センサー測定点)の最低到達温度を示します。
2.長期間安定した温度でお使いいただくためには、最低到達温度に対し、+5℃以上の設定をおすすめします。また、使用条件により、最低到達温度に達しない場合があります。
3.※印電源容量は、設置環境により周囲温度が35℃以上になることが考えられる場合には、20A以上としてください。
4.本仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。

設備に関する注意事項


ノンフロン製品は、可燃性物質を冷媒に使用しております。
万が一、冷媒が漏れたときも安全にお使い頂くために、最小設置床面積以上の場所に設置してください。

当社では安全性を担保する考えから、一般社団法人日本冷凍空調工業会の規格^(※1)に準拠しています。

※1 一般社団法人日本冷凍空調工業会 JRA4078
「可燃性冷媒を使用した内蔵形冷凍冷蔵機器の冷媒漏えい時の安全機能要求事項」




可燃性物質

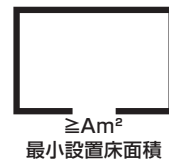

最小設置床面積

機種名	最小設置床面積(m²)
FMD-D350ESH	12
FMD-D520ETH	12
FMD-W330ESH	5

据付スペース

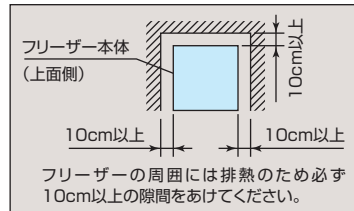

フリーザーの周囲には排熱のため必ず10cm以上の隙間をあけてください。

電源プラグとコンセントの形状

注) 電源は、必ず漏電遮断器を設けた専用回路としてください。(単相100V:三相200V共)

単相100V仕様:プラグ(AC125V15A)付

三相200V仕様: プラグ(AC250V20A)付

三相200V仕様:プラグ不付(M4丸端子付き)

FMD-D350ESH
FMD-W330ESH

FMD-D520ETH

FMD-D600ETRL
FMD-D700ETRL

・コンセント形状をご確認ください。
・機器の設置には単独回路が必要です。延長コードのご使用、タコ足配線での使用はお控えください。機器の故障の原因となります。

支店・営業所は全国に70カ所以上の サービスネットワーク

万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

GALILEI

Be cool, Be alive.



フクシマガリレイ株式会社

※カタログ・仕様図のダウンロードはホームページからできます。

URL <https://www.galilei.co.jp>



安全に関するご注意

- このパンフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管下さい。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- 仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 本パンフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はたかくお断りします。
- 製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

FMS事業部(東京)	(03)6361-1956	東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル3F
FMS事業部(大阪)	(06)6477-2121	大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
FMS事業部(札幌)	(011)833-1211	北海道札幌市白石区中央三条1-1-15
FMS事業部(仙台)	(022)259-1671	宮城県仙台市宮城野区中野1-5-4
FMS事業部(名古屋)	(052)559-2940	愛知県名古屋市中区金山5-13-24
FMS事業部(岡山)	(086)245-0551	岡山県岡山市北区中仙道1-1-11
FMS事業部(福岡)	(092)474-5881	福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27

製品についてのお問い合わせ、ご注文は

ISO 9001:2015
認証取得
品質保証
ISO 14001:2015
認証取得
環境保証

本パンフレットの記載内容は
2025年8月現在のものです。
(2508-00B)G

パンフレットNo.

MDP-170

超低温フリーザー Vital 特徴

大型カラー液晶タッチパネル (FMD-D600ETRL・FMD-D700ETRL)



- 直感的で分かりやすい大型カラー液晶タッチパネルを採用しています。
- 運転状況もタッチパネルで確認できます。
- 手袋をした状態でも操作が可能です。



温度データ



運転状況



警報履歴

機能的な扉

開けやすいドアラッチ

(FMD-D350ESH・FMD-D520ETH)

- 開けやすいドアラッチを採用し、保管物の出し入れが容易にできます。



電磁ロック搭載

(FMD-D600ETRL・FMD-D700ETRL)

- 保管物の紛失や誤使用を防ぐために関係者間でしか扉を開けられないようになっています。

フィルター

脱着可能なフィルター

(FMD-D350ESH・FMD-D520ETH・FMD-W330ESH)

- 着脱が容易で、簡単にフィルターの清掃ができます。



フィルターレス

(FMD-D600ETRL・FMD-D700ETRL)

- フィルターがないので、お手入れの手間が省けます。








各種警報機能 全機種採用

- 高温異常・低温異常等の各警報および外部警報機能を標準装備しており、トラブルにつながる異常状態を早期に発見できるようサポートします。

真空断熱材 全機種採用

- 真空断熱材を採用。断熱性能を向上させました。

プルダウンデータ

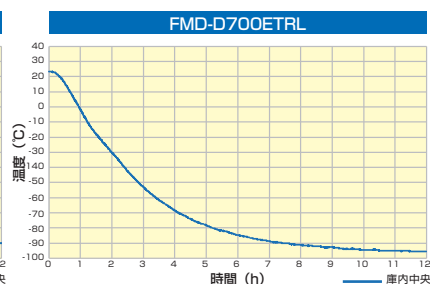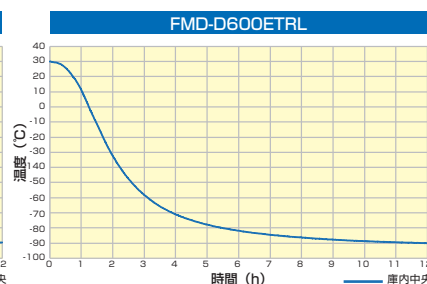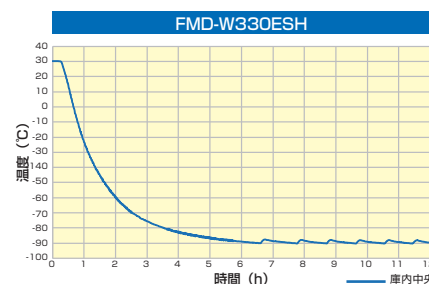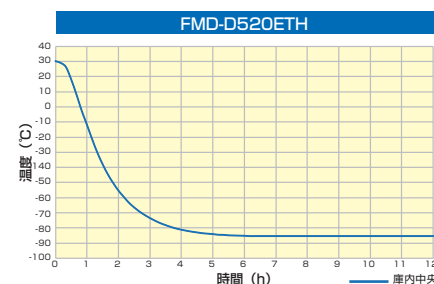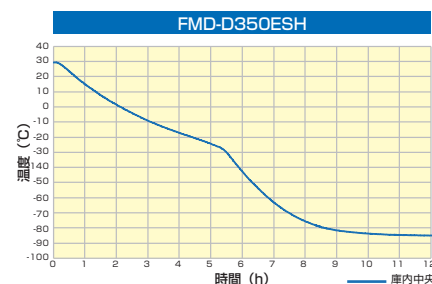

※測定条件 周囲温度30℃(FMD-D700ETRLのみ25℃)
※各データは当社基準で測定しております。
※各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。

超低温フリーザー Vital 特徴

ノンフロン仕様 (FMD-D350ESH・FMD-D520ETH・FMD-W330ESH)


地球温暖化係数が低い地球環境に優しい冷媒です。
また、フロン排出抑制法の対象外です。



デュアル冷却方式 (FMD-W330ESH除く)

- 独立した冷凍サイクルを2系統搭載することで、片側の冷凍回路が故障した際の温度上昇リスクを低減させ、貴重なサンプルの保管に対する信頼性・安全性を高めた製品です。

■デュアル冷却システム (イメージ)

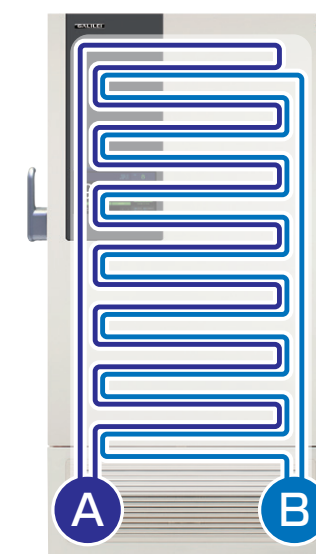


-80°C




一方の冷凍回路に
トラブルが発生して
も、もう一方冷凍回
路だけで-70°Cを
維持できます。



-70°C

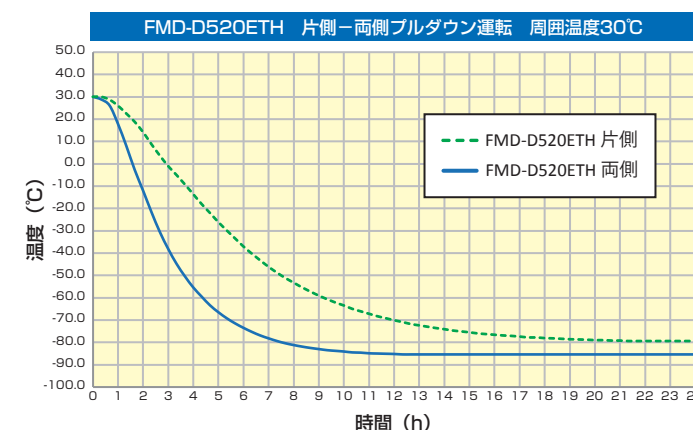

※各データは当社基準で測定しております。
※各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。

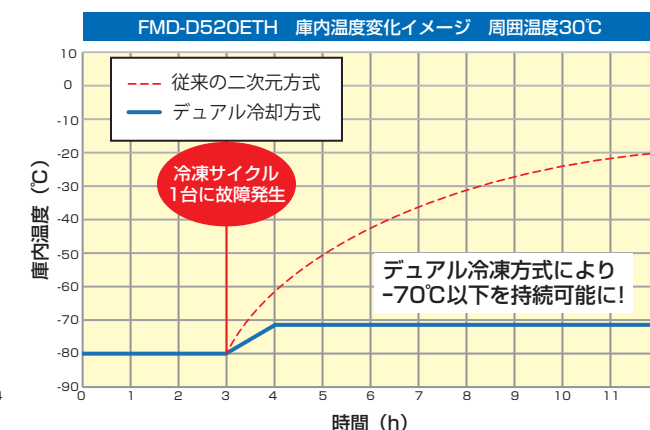

バリデーションサポートサービス

製品性能の品質の適切性を据付(IQ) / 稼働(OQ)の各段階で
立証・文書化し、書類にて報告します。
長期に渡り安心してご使用いただけるようサポートいたします。

打合せ

計画書提出

IQ/OQ実施

報告書提出

製品 ラインナップ

- 80℃ ～ - 60℃ 仕様

デュアル冷却方式



FMD-D350ESH

単相100V

標準価格 1,815,000円(税抜)

デュアル冷却方式



FMD-D520ETH

三相200V

標準価格 2,255,000円(税抜)

- 90℃ ～ - 50℃ 仕様

二元冷却方式




FMD-W330ESH

単相100V

標準価格 1,298,000円(税抜)

デュアル冷却方式

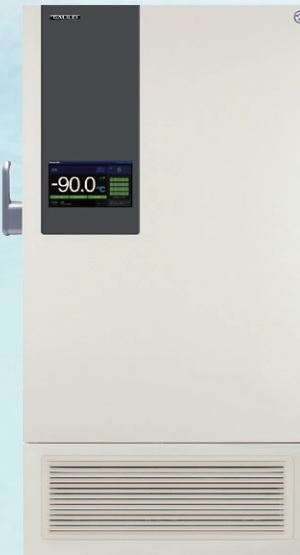

FMD-D600ETRL


三相200V

タッチパネル

フィルターレス

標準価格 2,563,000円(税抜)

デュアル冷却方式

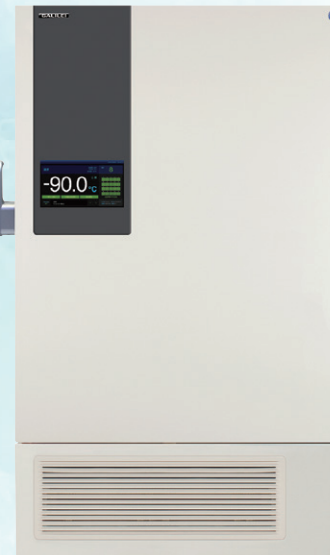

FMD-D700ETRL

三相200V


タッチパネル

フィルターレス


標準価格 2,838,000円(税抜)

型式	外形寸法(mm)	内形寸法(mm)	質量(kg)	内容積(L)	冷却方式
FMD-D350ESH	W741×D980×H1850	W490×D600×H1200	250	350	単元デュアル
FMD-D520ETH	W841×D980×H1990	W630×D600×H1380	290	519	単元デュアル


FMD-D350ESH

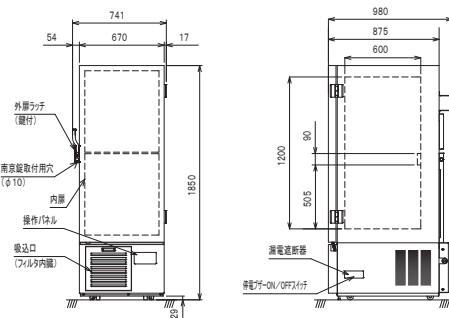


FMD-D520ETH

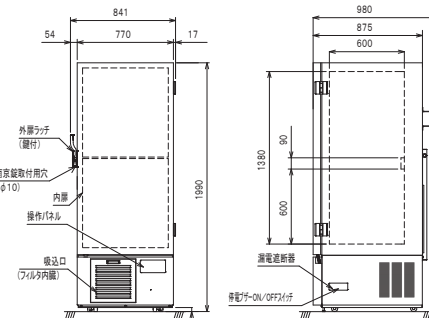


FMD-W330ESH

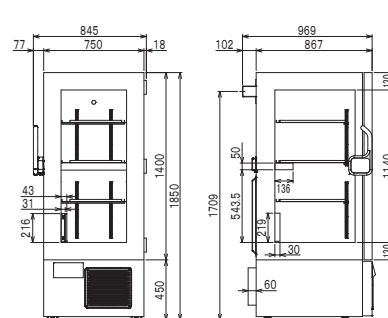

FMD-D600ETRL

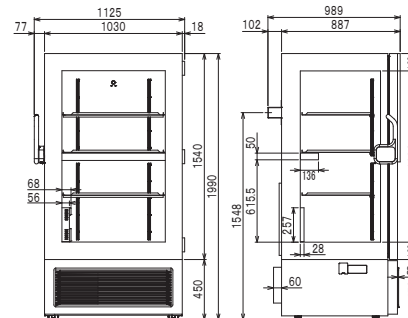

FMD-D700ETRL

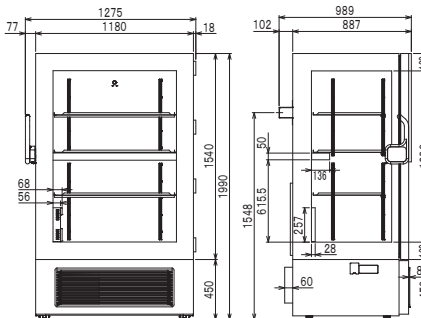

ノンフロン冷媒採用

オプション

補助冷却装置



型式：COB-BUT1(100V用)
COB-BUT2((200V用)



型式：COB-UP1-JP(100V用)
COB-UP2-JP(200V用)

停電または冷凍機の故障など万一の際に
液化炭酸ガスをフリーザー庫内に噴射させ庫内
の温度上昇を防ぐための装置です。

型 式	COB-BUT1	COB-BUT2	COB-UP1-JP	COB-UP2-JP
適用機種	FMD-D350ESH	FMD-D520ETH	FMD-W330ESH	FMD-D600ETRL FMD-D700ETRL
作動温度	高温警報設定温度(-70℃以上)			
取付位置	製品背面			
希望小売価格(税抜)				

注) 1. 液化炭酸ガスボンベ(サイホン管式)およびレギュレーターは、お客様にてご準備ください。
2. ボンベは、周囲温度30℃以下となるとところに設置してください。(周囲温度が31℃を超えると急速に冷却能力を失います。)
3. 温度保持時間の目安は30kgボンベにて約7時間となります。(高温警報温度:-70℃、周囲温度:-30℃の場合)

温度記録計



testo 176-T2



フラットコード
温度ケーブル



USBケーブル



SDカード

超低温フリーザー用温度ロガーセット

価格はお問い合わせください

《セット内容》
温度ロガー-testo 176-T2(外付2点タイプ)
フラットコード温度ケーブル(L=4,000mm)
USBケーブル(L=2,000mm)
SDカード(2GB)

注) 別途取付作業費が発生します

貯蔵ラック



型式:RS-R20T1

軽量で耐久性の高いアルミ仕上げの凍結
チューブ収納ボックス専用アルミ製ラックです。

使用上のご注意:
本製品は、爆発性物質および可燃性物質、さらにそれらを含む物質及び
それらの残留・混入する物質の保存には絶対に使用しないでください。

型 式	ラック寸法	適合収納ボックス	収納量	希望小売価格(税抜)
RS-R16T1	W140×D571×H225mm	W134×D134×H52mm 以下	16	¥55,000
RS-R20T1	W140×D571×H281mm		20	¥58,000
RS-R24T1	W140×D571×H336mm		24	¥64,000

機 種	対応する貯蔵ラック	ラック最大収納数
FMD-D350ESH	RS-R16T1、RS-R20T1	各6個 計12個
FMD-D520ESH	RS-R20T1、RS-R24T1	各8個 計16個
FMD-W330ESH	RS-R16T1	計11個
FMD-D600ETRL	RS-R20T1	計19個
FMD-D700ETRL	RS-R20T1	計23個

※引き出しタイプのラックもお取り扱いございます。当社担当へお問い合わせください。